

Possi はじめてのポッシ

Possi (ポッシ) 取扱説明書(保証書付)

このたびは、京セラ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、本書を必ずお読みください。
また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- <保護者の皆様へ>
- お子様だけで使用しないでください。

● 軽い力で小刻みに動かしてみがいてください。

● ハブラシをかむ等、強い力が加わると毛が抜けたり、折れたりすることがあります。

● ハブラシを口にくわえたまま走る、遊ぶ等をしてないようにご注意ください。

● 仕上げみがき専用(1〜5才用)です。

目次

● 保証書

● 安全上のご注意

● 仕様

● 保証規定

● 各部の名称

● 免責事項について

● ご使用方法

セット内容

・ポッシ(本体+ブラシ) 1匹

・置き台 1台

・ケーブル 1本

・動作確認用単5形電池 2本

※付属の電池は動作確認用です。保証対象外となります。

保証書

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、お客様相談室(0120-907-016 無料)までお申し出ください。

品名	はじめてのポッシ
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	1年間
お客様	お名前
	ご住所 〒
	電話番号
販売店	店名・住所・電話番号

お買い上げ時のレシートで、販売店印の代わりとすることができます。
お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

- 保証規定
1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書の警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。

2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります(または、修理ができない場合があります)。

(イ) 取扱説明書等の注意書の警告表示などに従った正しい使用がなされなかった場合

(ロ) 取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合

(ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合

(ニ) 噛みつきたり、落としたり、踏みつけてしまったことによる故障や損傷、またはその痕跡がある場合

(ホ) 洗剤や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等)のもので内部を濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合

(ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・塩害・ガス害・指定外の使用電圧(電圧・周波数)およびその他天災地変などによる故障や損傷の場合

(ト) 一般家庭用以外(例えば、業務用での長時間使用など)での使用による故障や損傷の場合

(チ) 本保証書のご提示がない場合

(リ) 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合があります。

4. ポッシのしっぽ(ブラシ部)は消耗品です。毛の開きなど消耗程度によっては修理できない場合があります。

5. 出張による修理対応はお受けできません。

6. 本商品は故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、一切の責任を負いません。

7. 本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

8. 本保証書は日本国内でのみ有効です

9. 修理の際、部品・その他付属品は、代替品を使用させていただくことがあります。

- 免責事項について
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤使用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

○ 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

○ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 安全上のご注意
- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

● この「安全上のご注意」にはポッシを使用するお客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

- 表示の説明
- 危険

この表示を守らずに誤った使いかたをすると「人が死亡または重傷^(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

警告

この表示を守らずに誤った使いかたをすると「人が死亡または重傷^(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意

この表示を守らずに誤った使いかたをすると「人が傷害^(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害^(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を指します。
- 図記号の説明



行ってはいけない(禁止)内容を示しています。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただきたい(強制)内容を示しています。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。

■ ポッシについて

危険



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高压容器に入れてください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。



導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、電源を切り、お客様相談室までご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



使用前に本体とブラシ部がしっかりと接続できているか確認してお使いください。ポッシのしっぽ(ブラシ部)が外れた場合、のどに詰まる場合があります。



ポッシ、ポッシのしっぽ(ブラシ部)、置き台、ケーブル、電池はお子様の手の届かないところに置いてください。また、お子様だけでのご使用は避けてください。お子様が飲み込む原因になります。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



ポッシのしっぽ(ブラシ部)は複数のお子様で共用しないでください。病原菌に感染する原因になります。



下記の方は、歯科医にご相談の上、ご使用ください。症状を悪化させたり、ケガの原因になります。

○ 口内の感覚が敏感なお子様

○ 口腔または歯周手術の直後や治療中のお子様

○ 口腔内に気になる病状(治療中の歯など)のあるお子様

○ 歯グキからの出血が続く、または大量の出血のあるお子様



心臓ペースメーカー・細動除去器をご使用の方は、医師に相談してからご使用ください。



電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、すぐに大量の水で洗い、医師の治療を受けてください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。

警告



定期的にブラシヘッドが破損していないか、割れが生じていないかを確認ください。ポッシのしっぽ(ブラシ部)および、破損した部品を飲み込むと窒息する可能性があります。



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電・けがの原因となります。



水につけたままにしないでください。破損・故障の原因になります。



水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショートによる故障の原因となります。



ポッシのしっぽ(ブラシ部)接続部や電池カバーの防水ゴムは外さないでください。故障の原因になります。



内部を水に濡らしたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、お客様相談室までご連絡ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。



電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがありますので、下記に注意してください。



○ 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。

○ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

○ +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

○ 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

○ 電池の消耗・液漏れ防止のため、長期間使用しない場合は、電池を外してください。

○ お手入れをするときは、乾電池を抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。

○ 電池をショートさせたり、充電・加熱・分解、改造、火の中に入れたりしないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷させ、電池を漏液・発熱・破裂させるおそれがあります。



ケーブルについて、やけどや火災の原因となりますので、下記事項はおやめください。

○ コネクタおよびケーブルを加工、分解すること

○ ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、ケーブルの上にものを置くこと

○ 水や異物が入った状態で使用すること



アルカリ電池を使い切った後は、すみやかに取り外してください。そのままの状態で放置すると、電解液が漏れ出す場合があります。

注意



使用時にケーブルがからまる可能性がありますのでご注意ください。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや故障の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。

お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。



ベットなど人以外に使用しないでください。また、ハミガキ以外の目的で使用しないでください。

事故やトラブルの原因になります。



ケーブルを差したまま(電源を入れたまま)放置しないでください。漏液、発熱などを起こし、本体が故障する原因となります。




化粧品、ハンドクリームなどの油成分の付着により外観が損なわれる場合があります。



使用して気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。

各部の名称

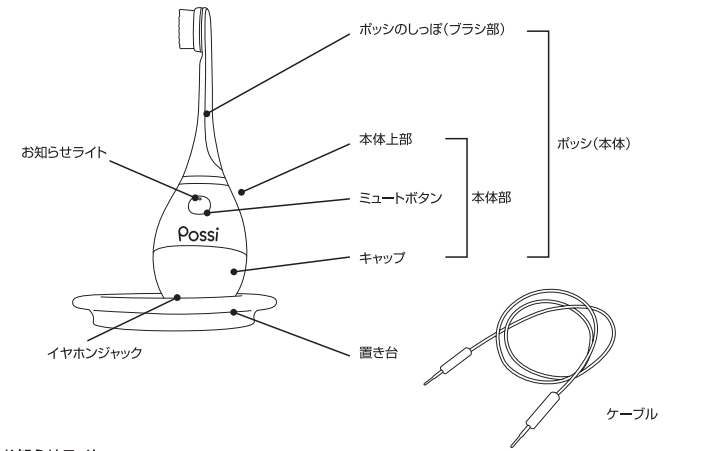

白色	正常に動作しています。
白色(点滅)	ミュート状態です。 ※音楽は流れていません。
赤色	電池切れです。電池を交換してください。
赤白(点滅)	不具合があります。ブラシの取り付けを確認してください。ブラシの取り付け等に異常がない場合は、電池が消耗しています。お早めに電池を交換してください。


ご使用方法

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。


はじめに 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください

- ①キャップを両サイドから押しながら外し、電池カバー止めビス 2箇所をドライバー等で外します。

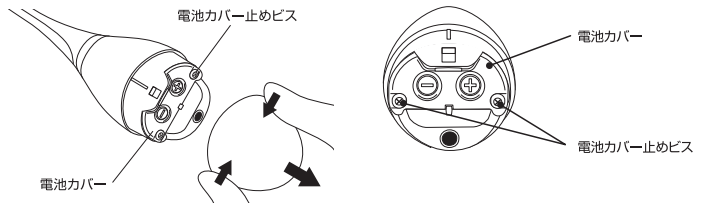


②電池カバーをあけ、単5形アルカリ電池を入れます。

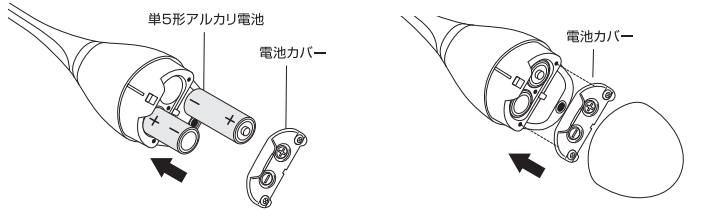


注意	●単5形アルカリ電池2本で約120回ご使用になれます。(1回2分、室温(約20℃)にて使用した場合) ●必ず単5形アルカリ乾電池をご使用ください。 ●ポッシ(本体)や手が濡れた状態で、電池カバーの開閉、電池の出し入れをしないでください。故障の原因になります。 ●電池カバーが完全に締まっていない場合、内部に水等が入り、故障の原因になります。
----	---

ご使用方法 歯みがき


①イヤホンジャックにケーブルを差し込み、電源を入れます。
※お知らせライトが白に光る事を確認してください。

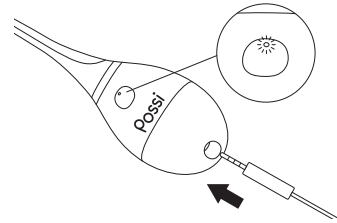


②ケーブルをお手持ちのオーディオ機器につなぎ、オーディオ機器を再生します。
※音量はオーディオ機器側で調整してください。

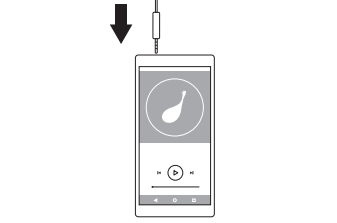

③ブラシが歯に触れると音が聞こえます。まず、お客様の前歯に当てて音楽が聞こえているか様子を見てから歯みがきを始めてください。
※お客様が歯ブラシを噛んだ時にはミュートボタンを押してください。音楽を停止すると共に噛まないようお子様にお声かけください
※お子様に持たせないでください

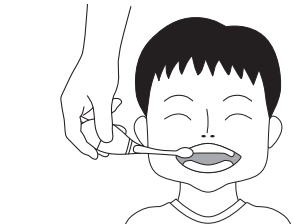

④歯みがきを終えたら、ケーブルを抜いてください。電源が切れて、お知らせランプが消えます。
※差したままにせず、必ず抜いてください。

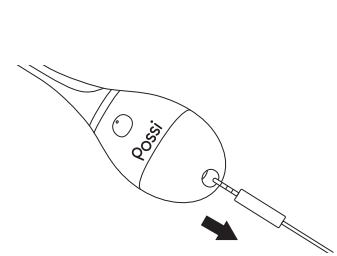

注意	●ご使用中に違和感を感じる場合は、歯科医にご相談の上、ご使用ください。 ●現在、歯の治療を受けていたり、歯や歯グキの病気にかかっているお子様には、歯科医にご相談の上、ご使用ください。 ●ブラシ部を歯や歯グキに強く押し当てたり、毛先以外のプラスチック部分を当てないでください。また、長時間同じ箇所を磨かないでください。歯や歯グキに損傷を与えたり、故障の原因になります。 ●本体部とブラシ部がしっかりと固定されていない状態で使用しないでください。事故や故障の原因になります。 ●ポッシを口に入れたまま手を離さないでください。ブラシ部が外れる場合があります。 ●浴室内など水のかかる場所で使用しないでください。故障の原因になります。
----	--

ご使用方法 お手入れ


ブラシ部のお手入れ

①ブラシ部を水洗いし、水気を切った後、風通しの良い所に保管してください。
※ブラシ部を洗う時は本体から外さないでください。



端子部のお手入れ

②ひと月に数回の頻度で、ブラシ部を外して端子部と接点部を乾いた布でやさしく拭いてください。
※水やアルコール、洗剤等は使用しないでください。

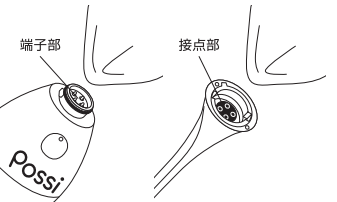

注意	●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤等を用いると外装や文字が変質する恐れがありますので、使用しないでください。 ●本体内部に水などが入らないようにしてください。破損・故障の原因になります。
----	--


ご使用方法 保管

注意	●使用後は必ずケーブルを抜いて保管してください。 ●電源が入ったままの状態になり、電池切れになる場合があります。 ●以下のようなところに保管しないでください。 ○高温・多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ ○傾斜、振動、衝撃のあるところ ○風呂場等水のかかるところ ○腐食性ガスの発生するところ ○化学薬品の保管場所 ○火気の近く ●長時間使用しない時は、電池をポッシ(本体)から取り出してください。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。
----	--

ご使用方法 ポッシのしっぽ(ブラシ部)の交換


しっぽ(ブラシ部)を外す

①ポッシのしっぽ(ブラシ部)を固定し、本体を反時計回りに回して外します。

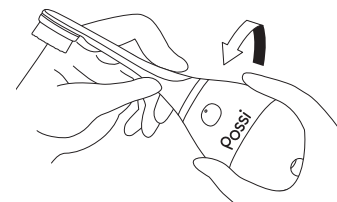


新しいポッシのしっぽ(ブラシ部)をつける


②ポッシのしっぽ(ブラシ部)の底部に、本体上部のつめがまっすぐ入るように押し込みます。

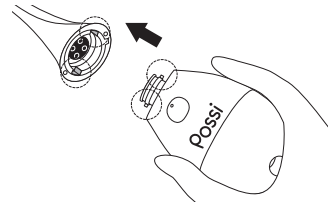

③ポッシのしっぽ(ブラシ部)を固定し、本体部を時計回りに回します。

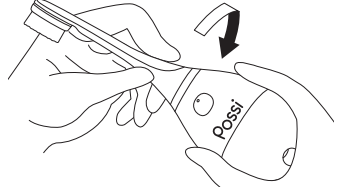

④裏面のアイマークが揃っていることが確認してください。

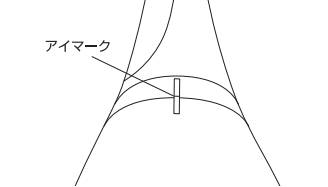

■ポッシのしっぽ(ブラシ部)について

- ポッシのしっぽ(ブラシ部)は消耗品です。毛先が広がったり、樹脂部分が傷ついた場合は使用を中止し、新しいものと交換してください。
- ブラシ部は「ポッシのしっぽ(ブラシ部)」をお買い求めください。

仕様

外形寸法・重さ	ポッシ(本体): 約 40×46×153mm, 43g ※電池含まず ポッシのしっぽ(ブラシ部): 約 30×25×87mm, 5g
電源	単5形アルカリ乾電池2本
品質表示	柄の材質 : ポリプロピレン、SBC 毛の材質 : ナイロン 毛のかたさ : やわらかめ 耐熱温度 : 60℃

置き台	ケーブル
外形寸法・重さ	ケーブル長
材質	コネクタ形状

商品に関する相談、お問い合わせは、お客様相談室へ
TEL.0120-907-016 (無料)
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝・会社休日は除く)
〒220-0012 神奈川県横浜西区みなとみらい3-7-1
URL https://www.kyocera.co.jp/

製造販売元 京セラ株式会社 Possiプロジェクト

「Possi(ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。

© 2021 KYOCERA Corporation