



FINESIA®
Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type

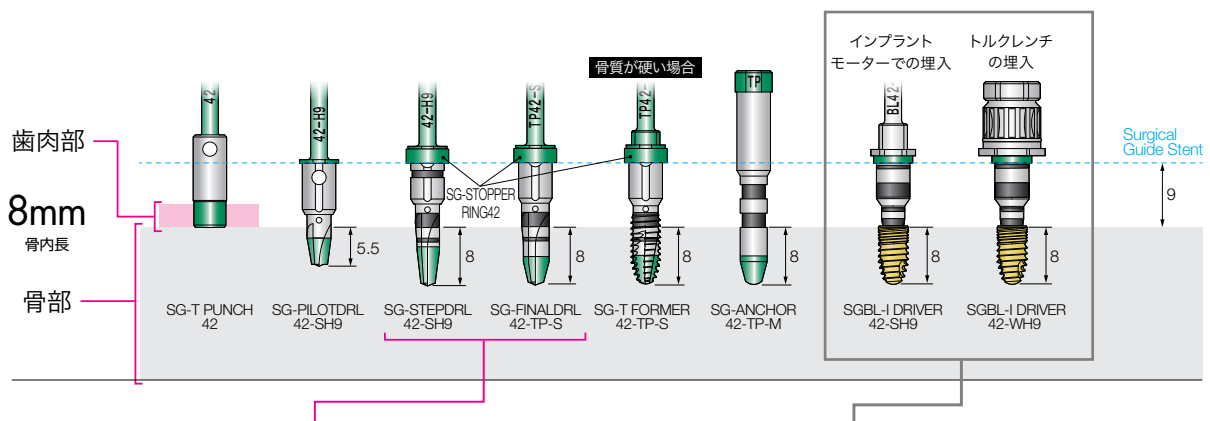


術式チャート

Tapered type

術式チャートの見方

(例) サージカルガイドステント高さ9mm、インプラント径φ4.2mm、骨内長8mm、Tapered typeの場合



SGステップドリル、SGファイナルドリルTPの記載寸法は、ドリルに対応するインプラント長です。

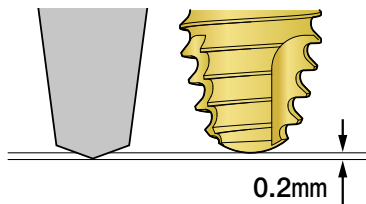
骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER *SH*タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER *WH*タイプを選択することができます (ただし、インプラント径 φ3.0mmには、どちらのドライバーも用意されていません)。

ドリル先端仕様

SGステップドリル、SGファイナルドリルTPのドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル


φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm → 0.2mm長い



SGファイナルドリルTP

φ3.0mm φ3.2mm φ3.4mm φ3.7mm → 0.1mm長い

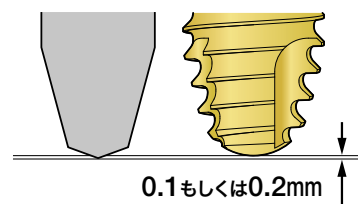φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm → 0.2mm長い




サージカルガイドシステム高さ 9mm

FINESIA®
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Tapered type  術式チャート

インプラント径 $\phi 3.0\text{mm}$

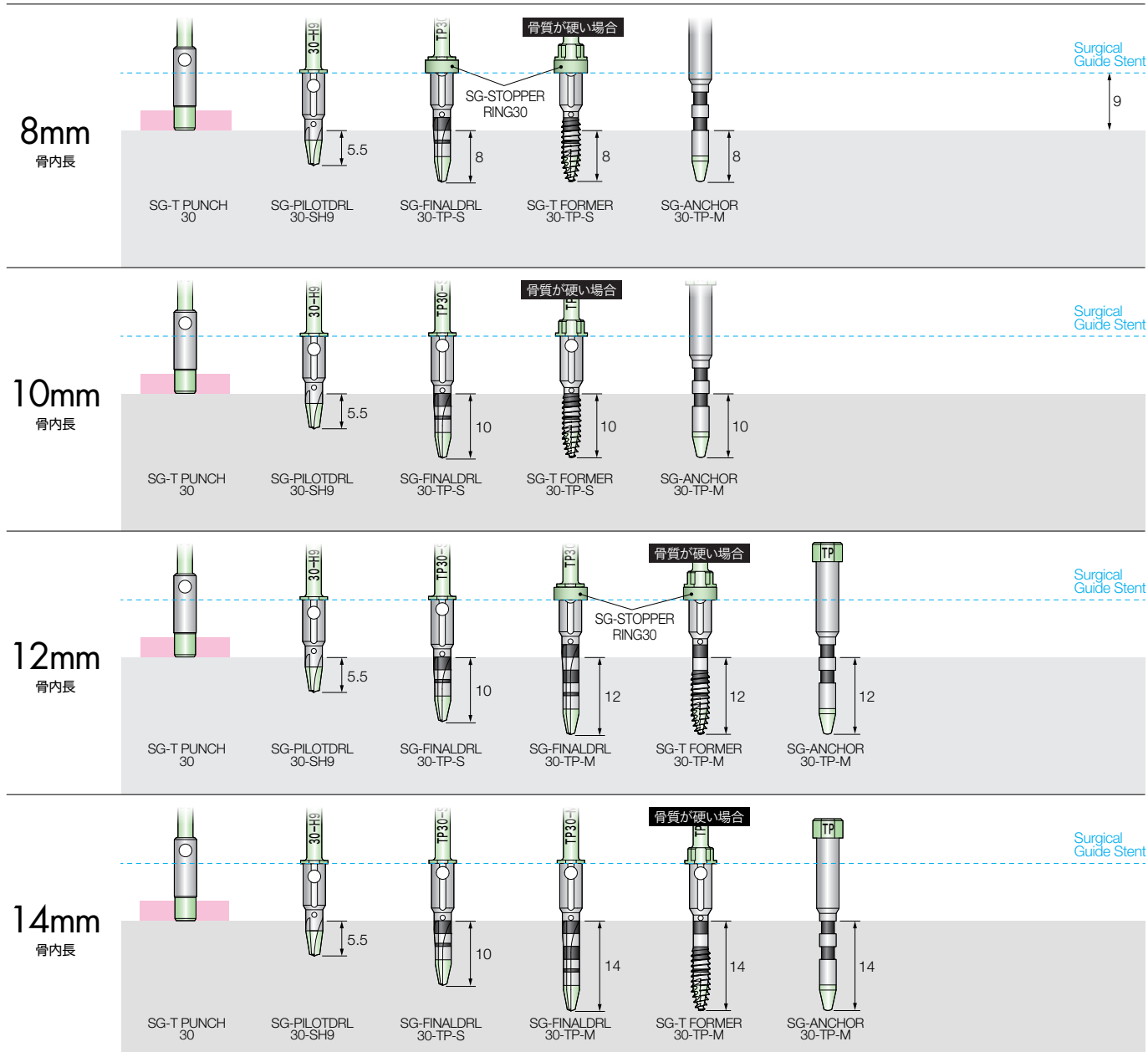1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。




1P: 1Piece

単位 :mm

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$

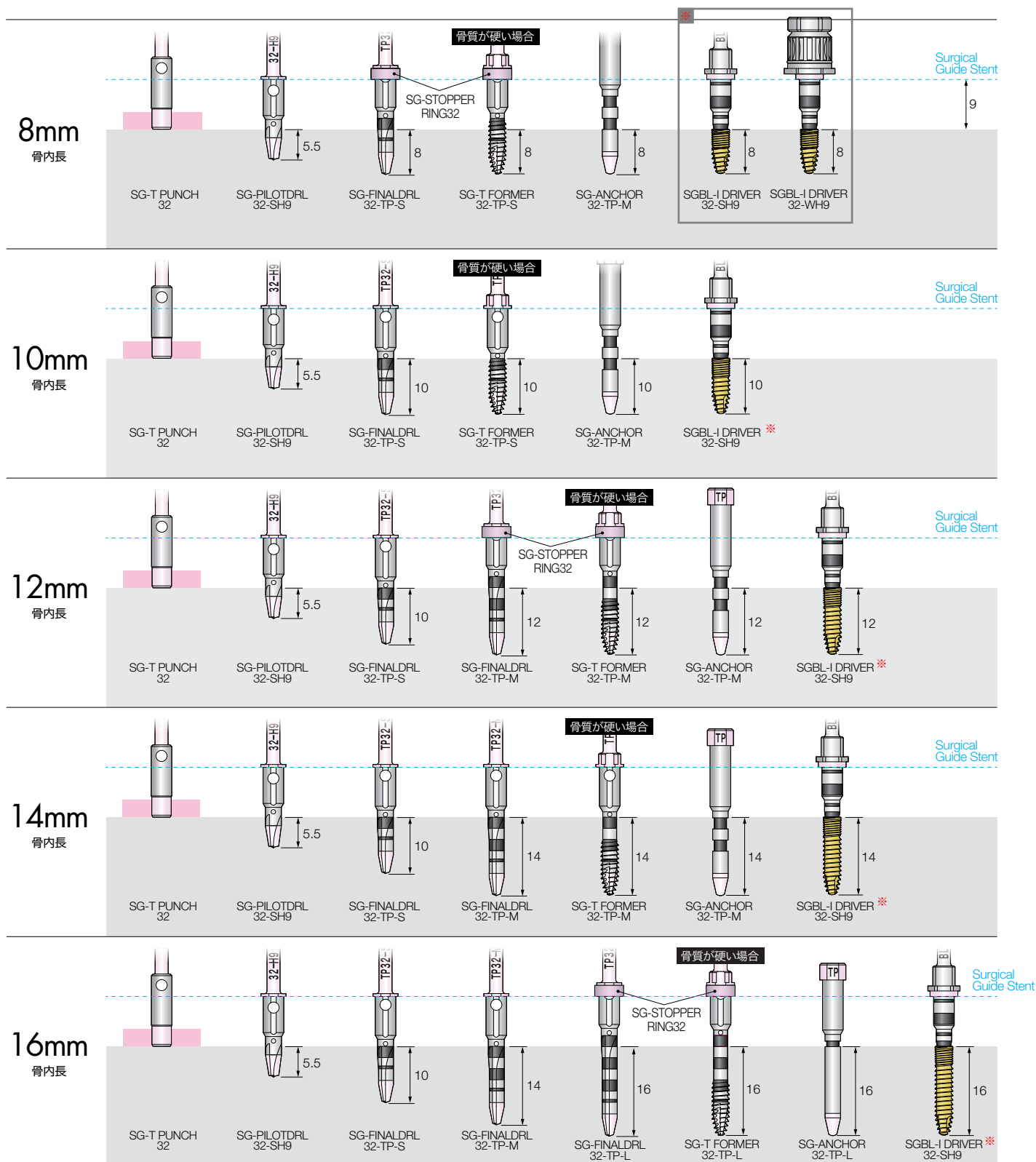1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。




1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

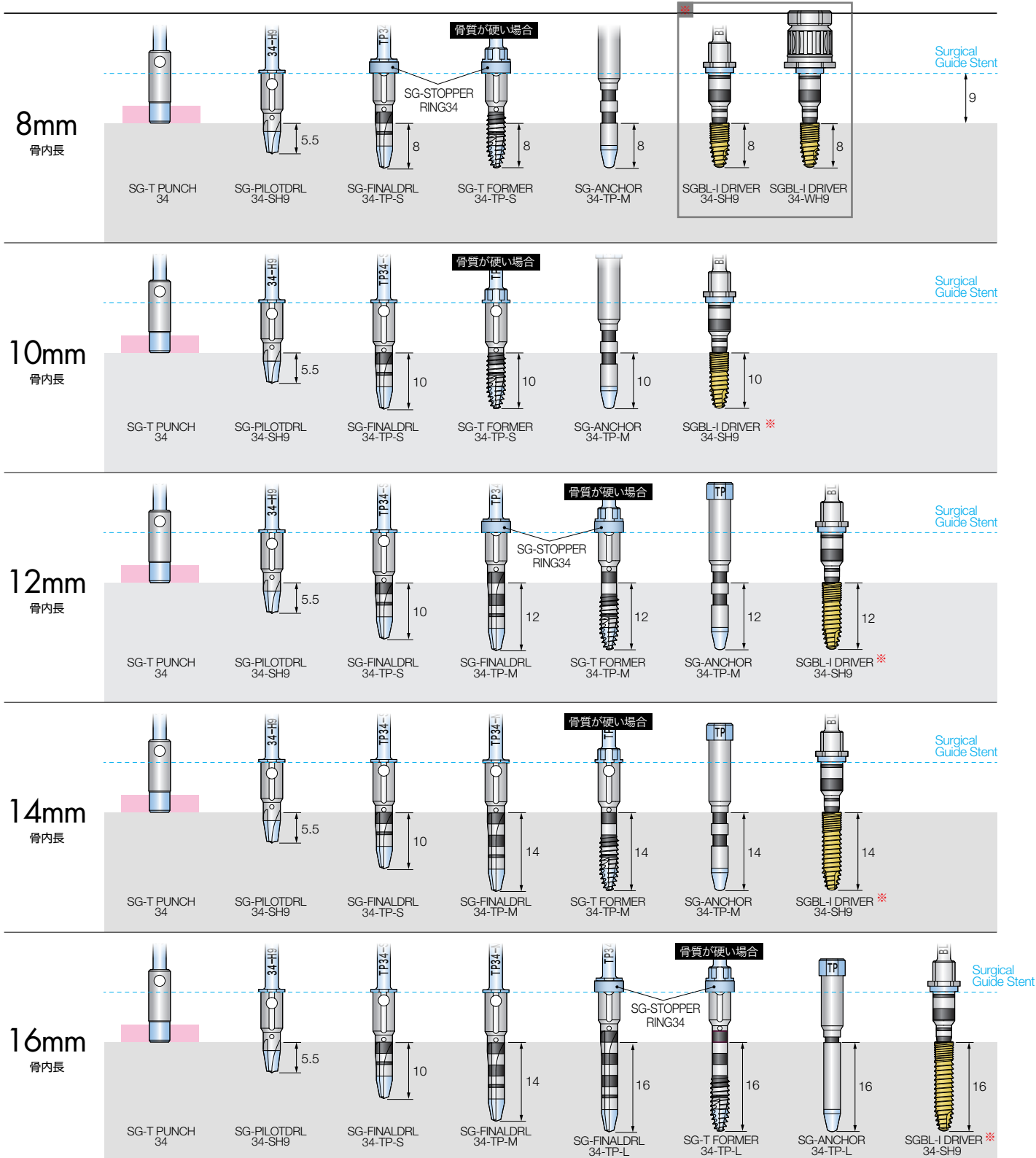1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。




1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

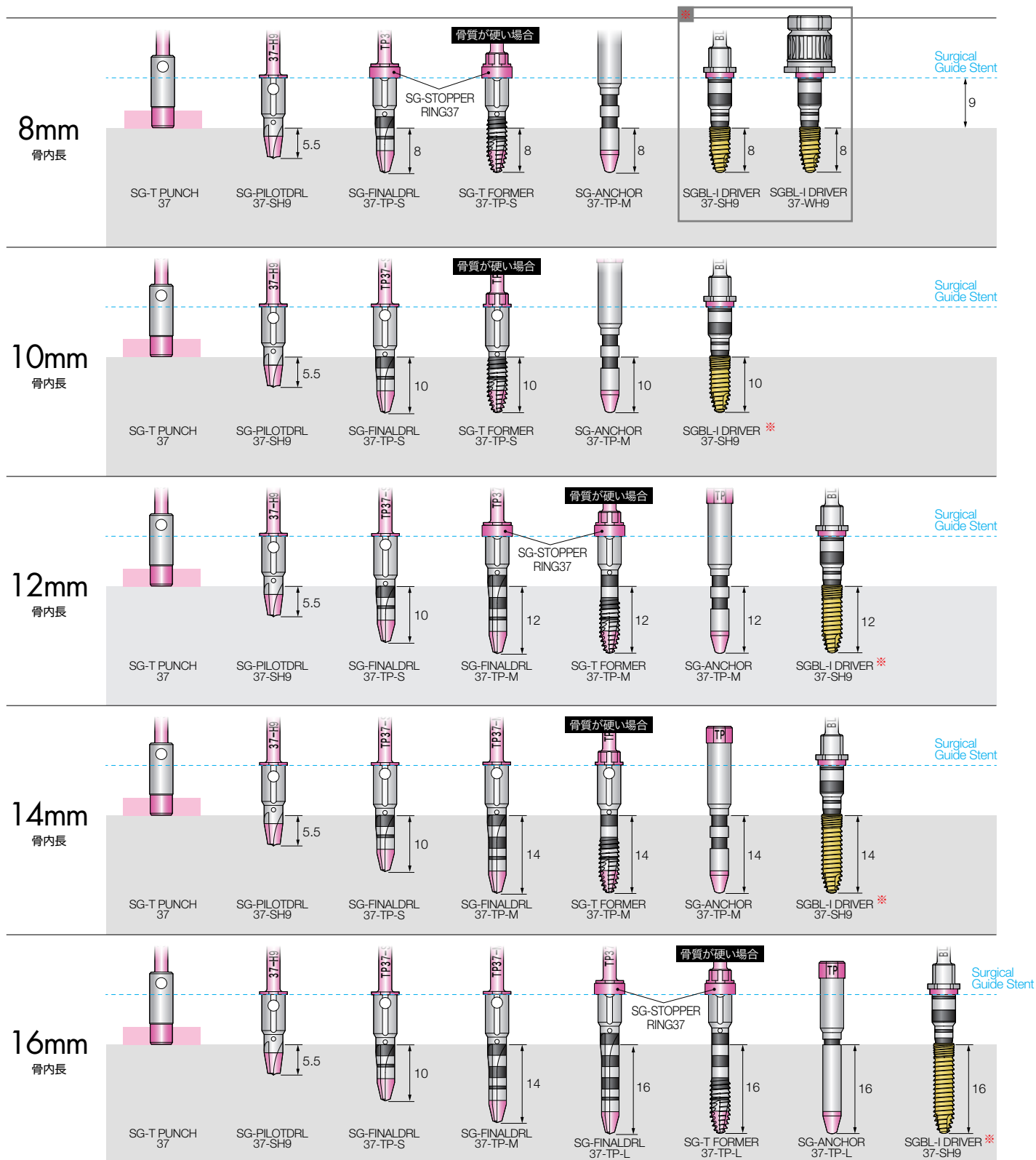1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。




1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

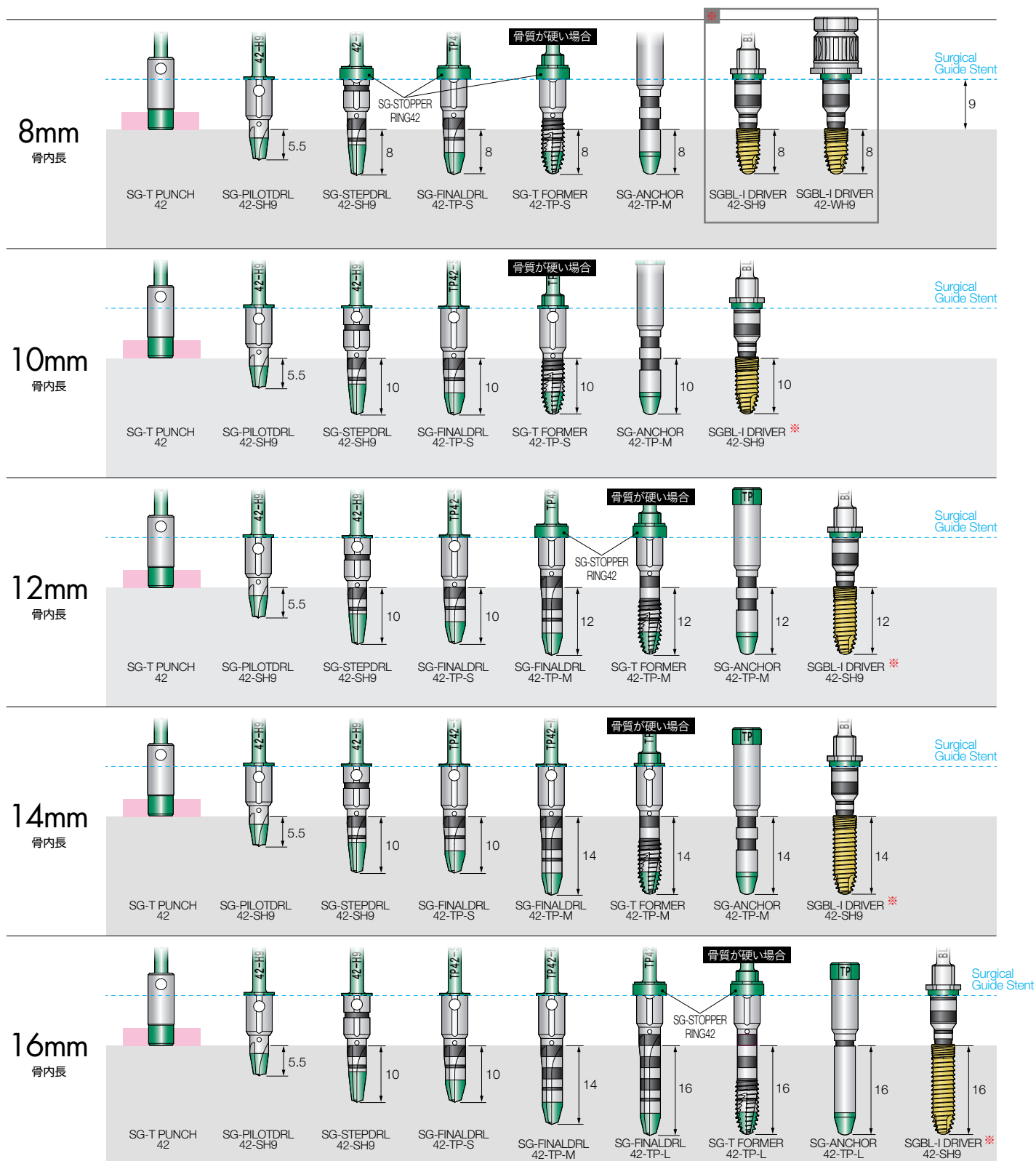1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。




1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※ 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

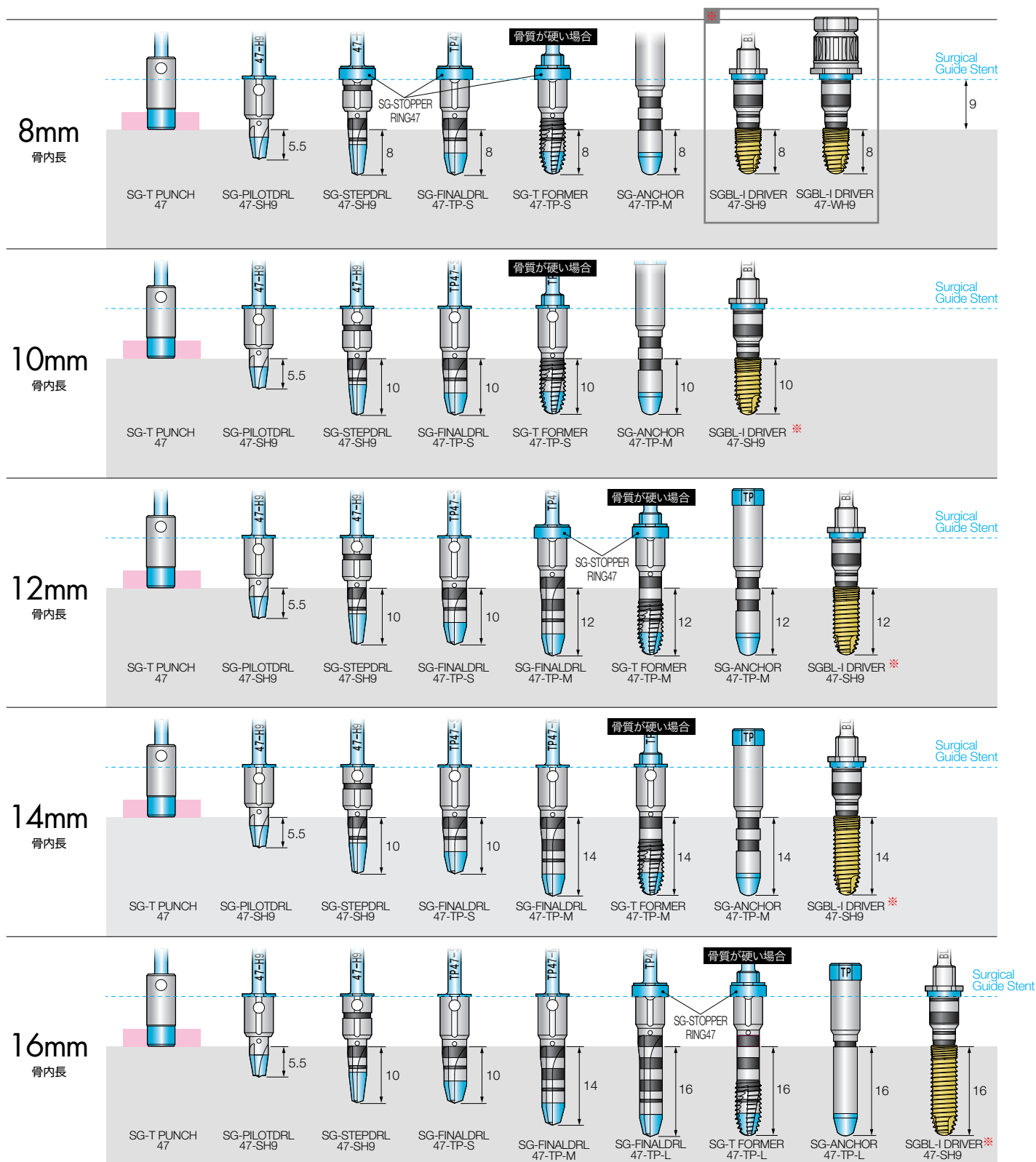1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

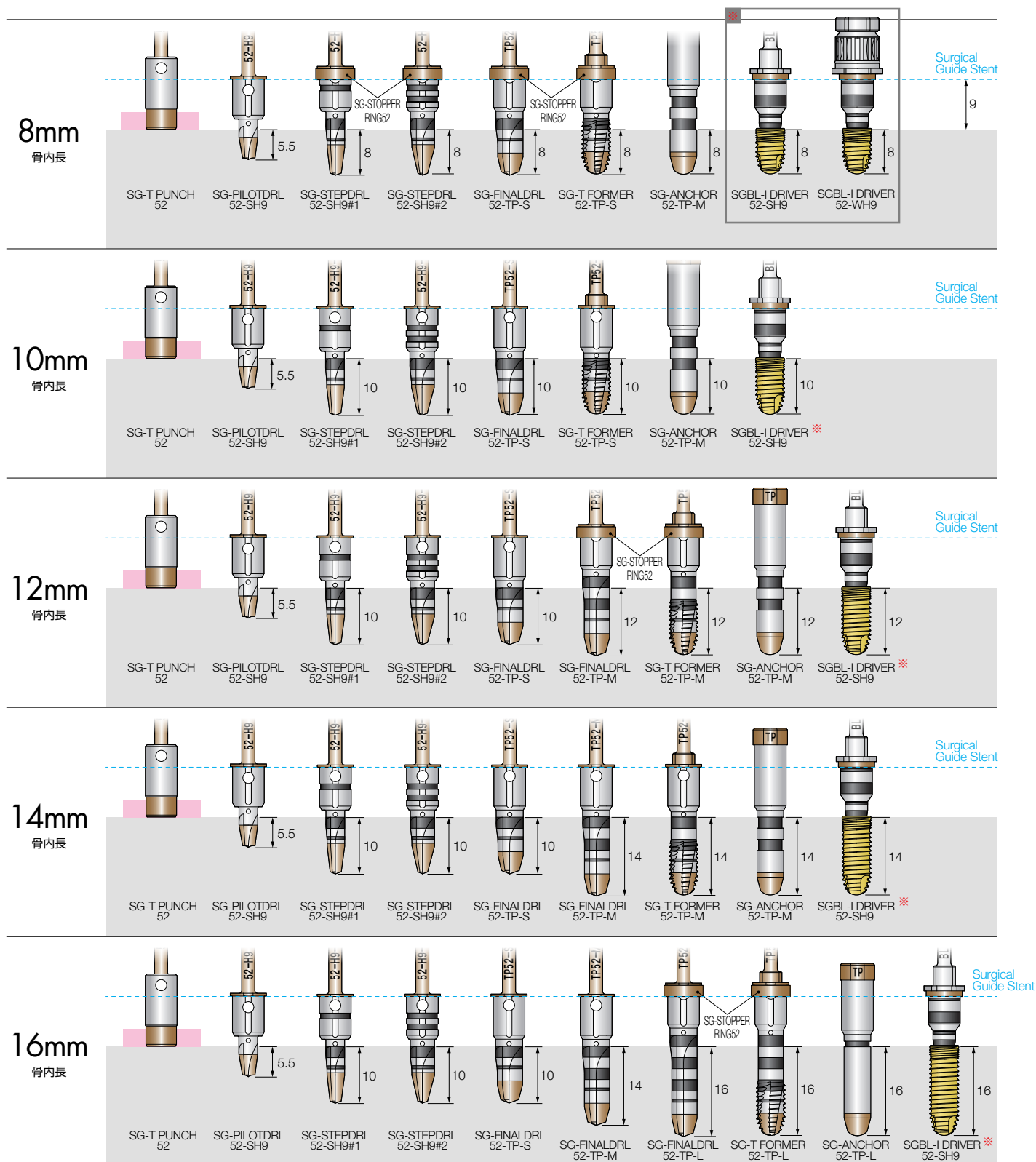
9mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドシステムを外してインプラントを埋入してください。



※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

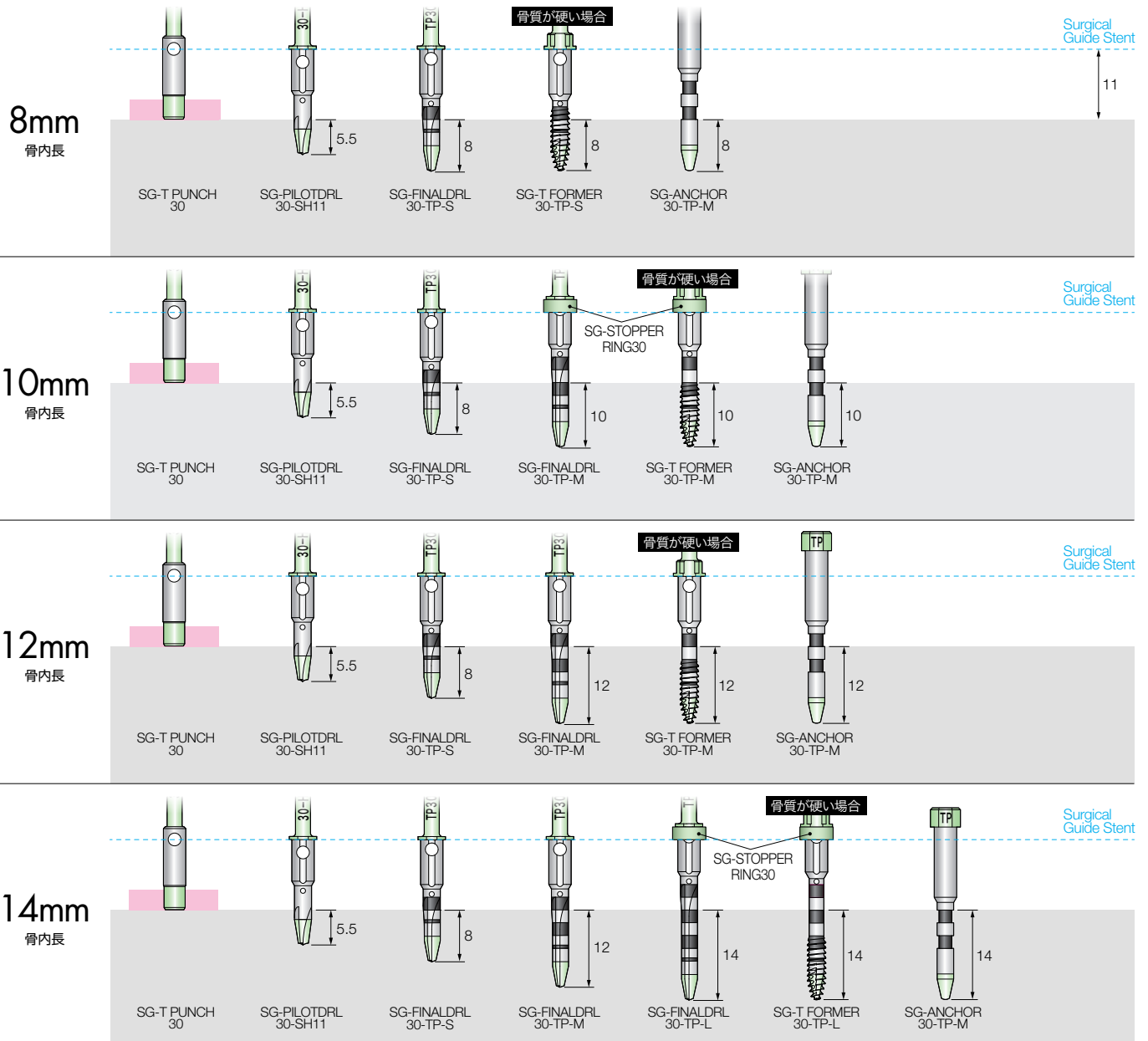
サージカルガイドステント高さ **11 mm**

FINESIA[®]
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Tapered type  術式チャート

インプラント径 $\phi 3.0\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1 Piece

単位 :mm

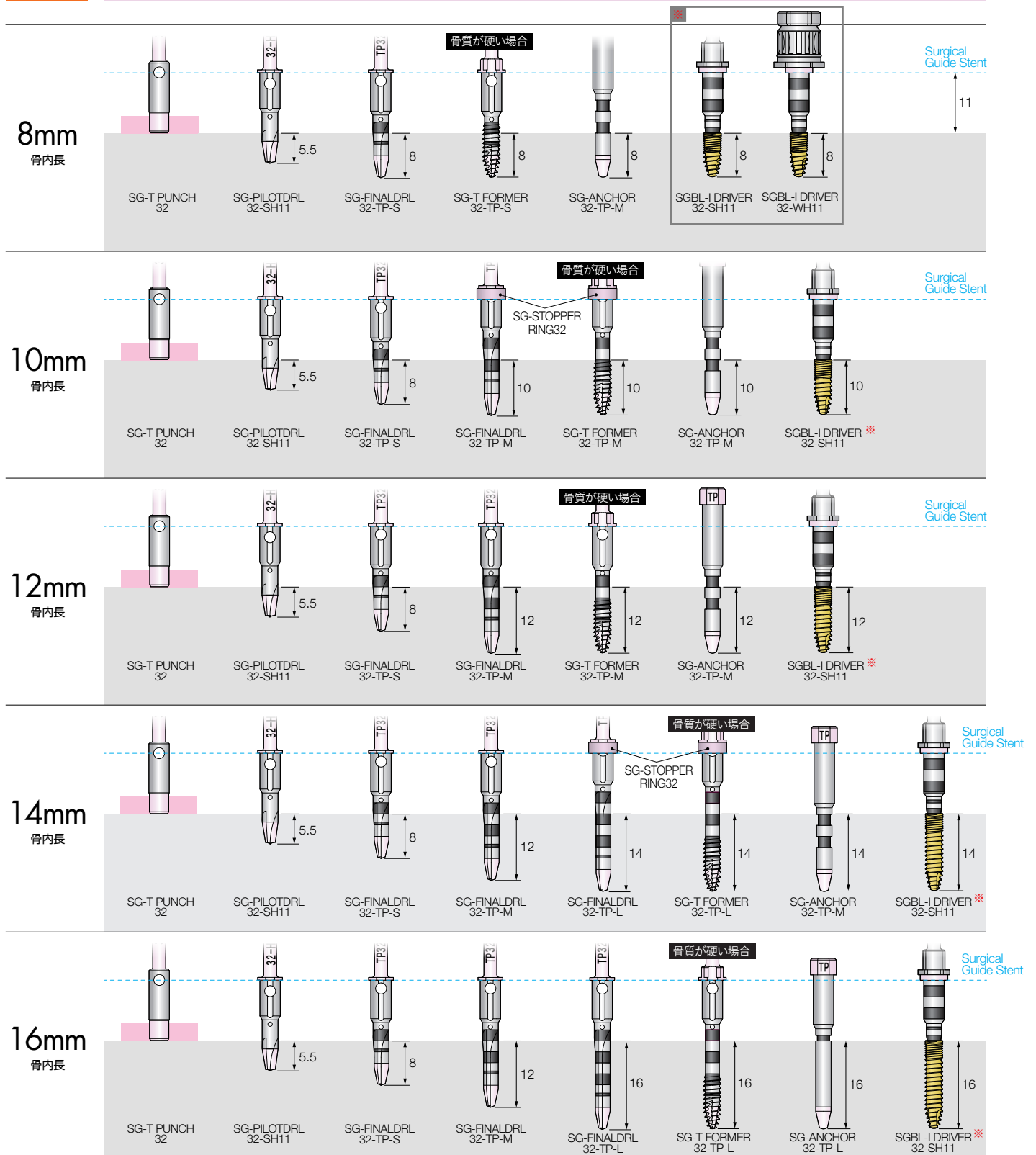
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH11タイプを選択することができます。

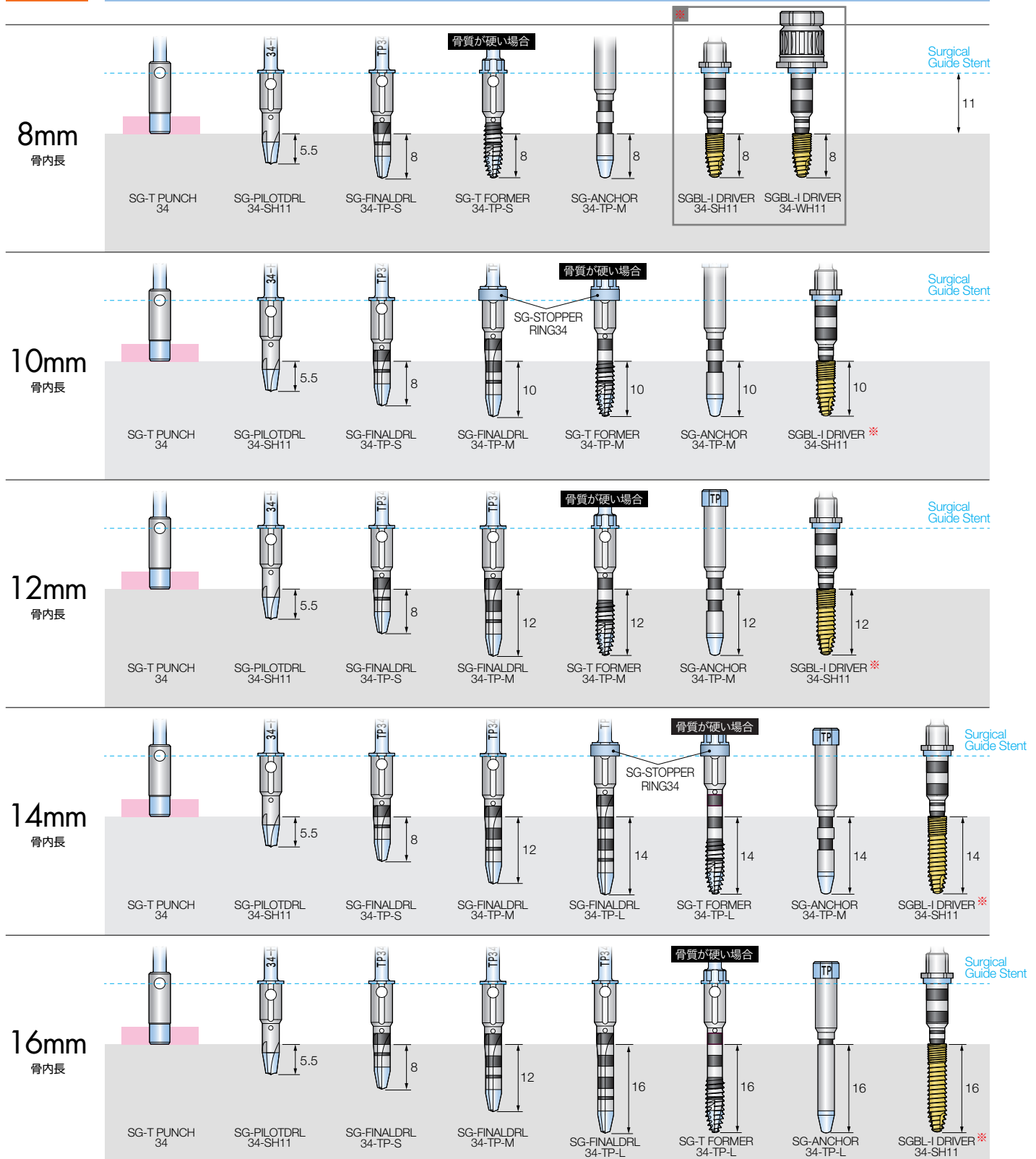
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH11タイプを選択することができます。

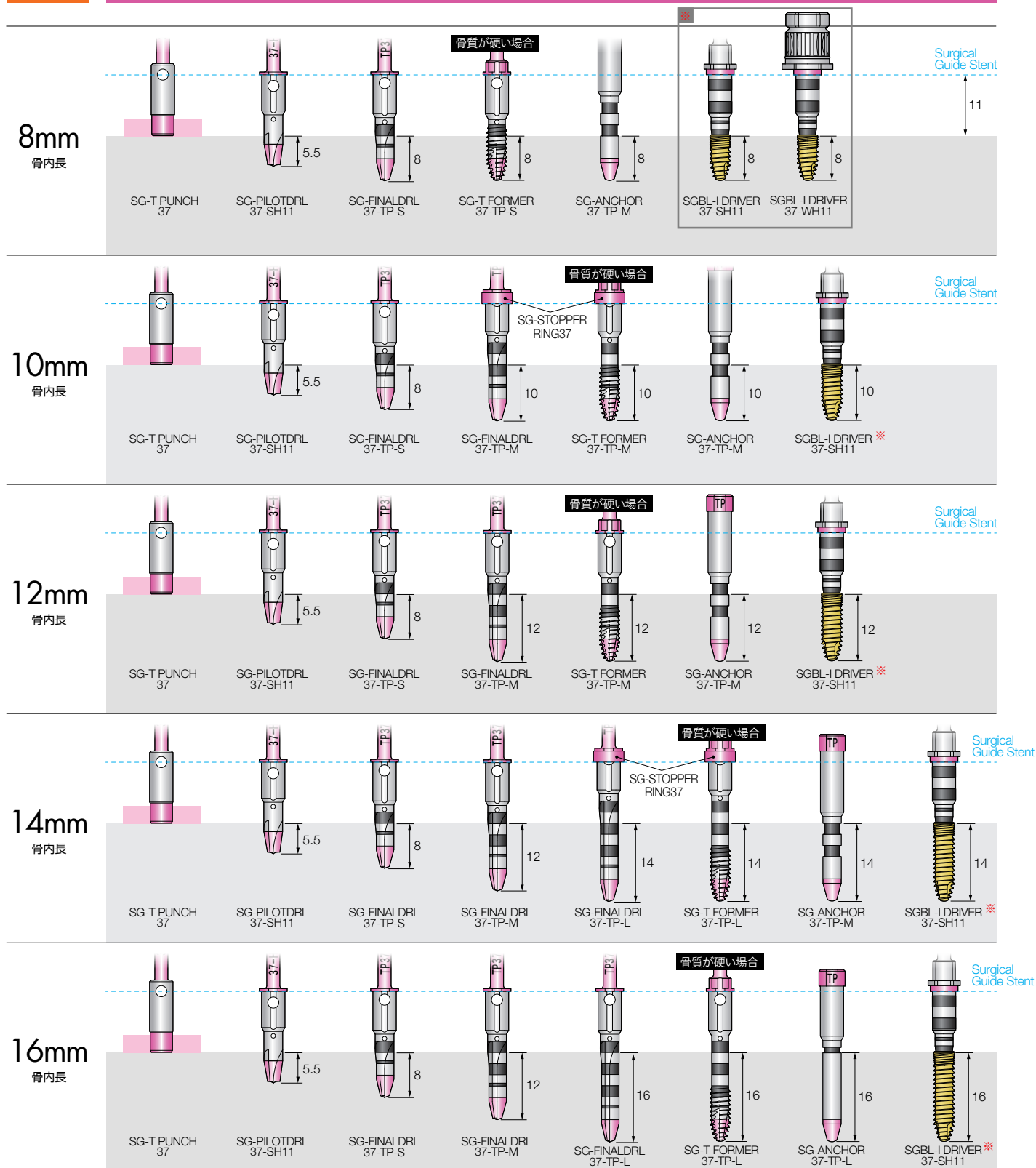
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH11タイプを選択することができます。

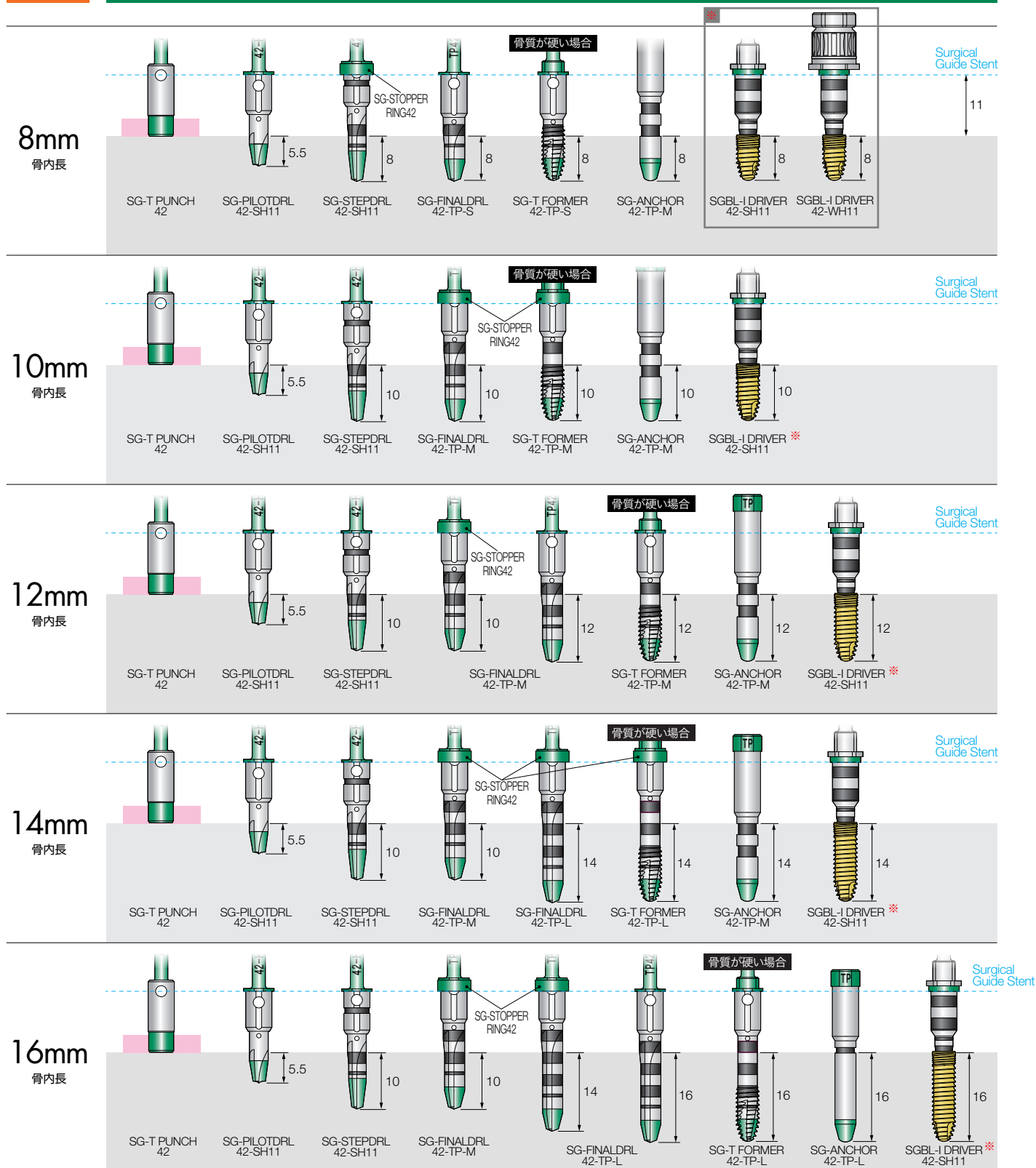
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH11 タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH11 タイプを選択することができます。

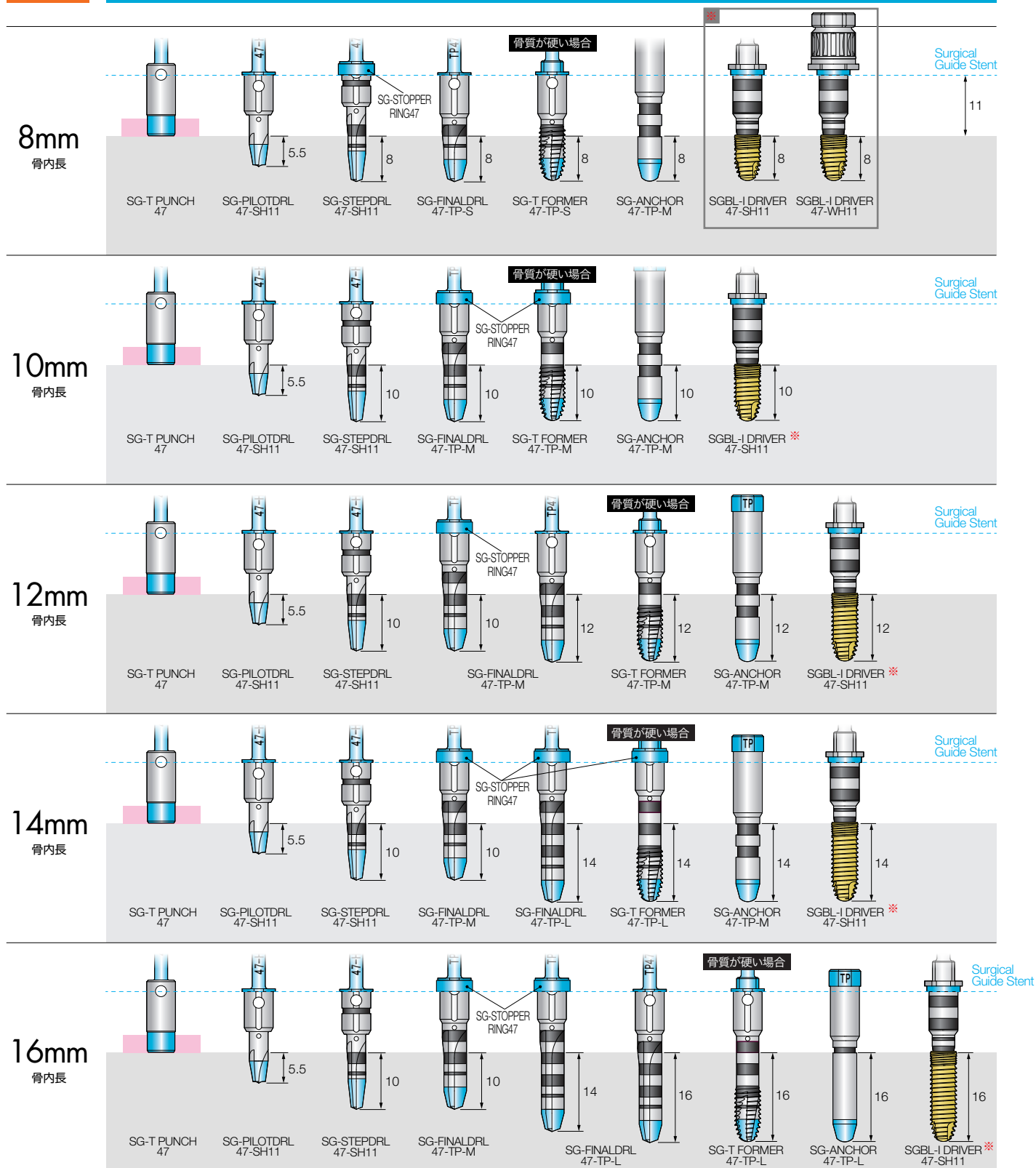
11mm
サージカルガイドシステム用

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P, TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH11 タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH11 タイプを選択することができます。

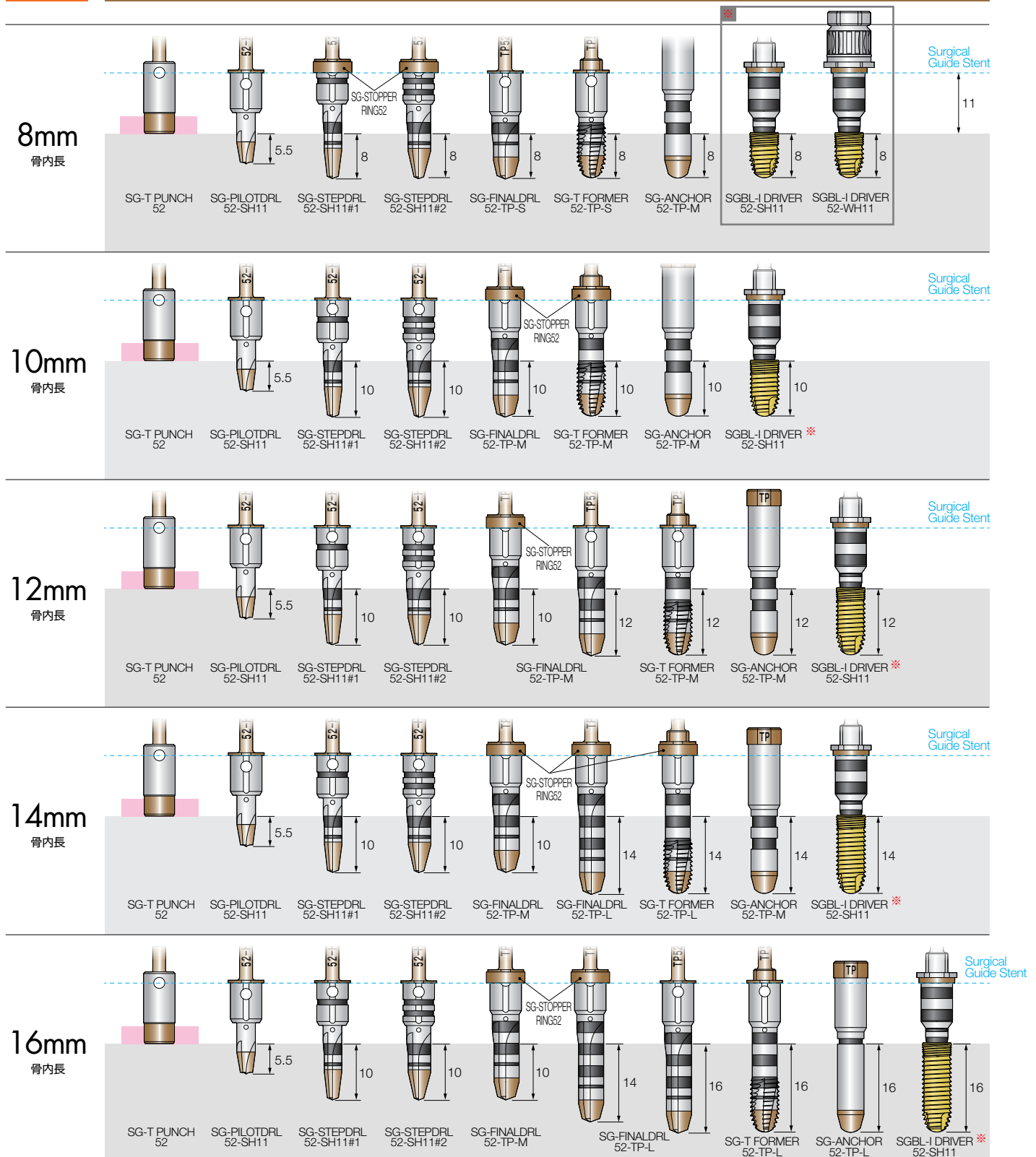
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドシステムを外してインプラントを埋入してください。



TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH11 タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH11 タイプを選択することができます。

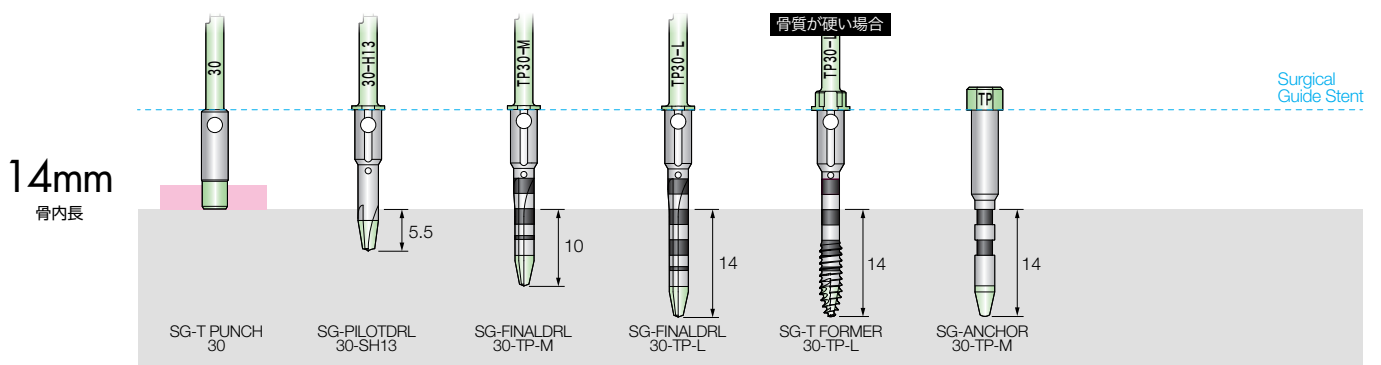
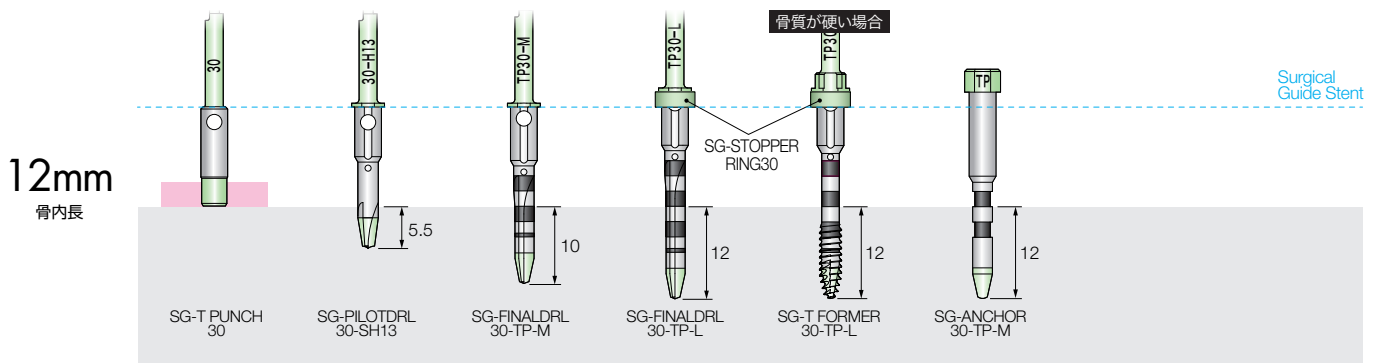
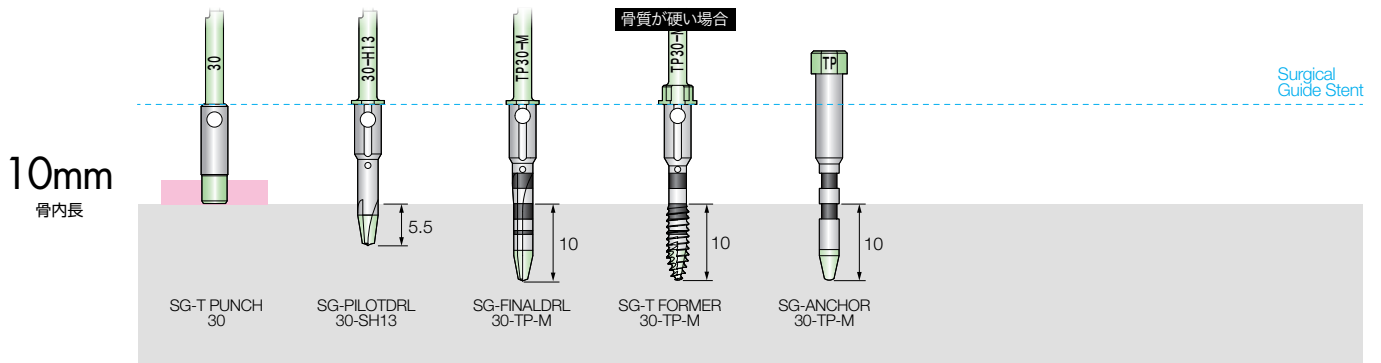
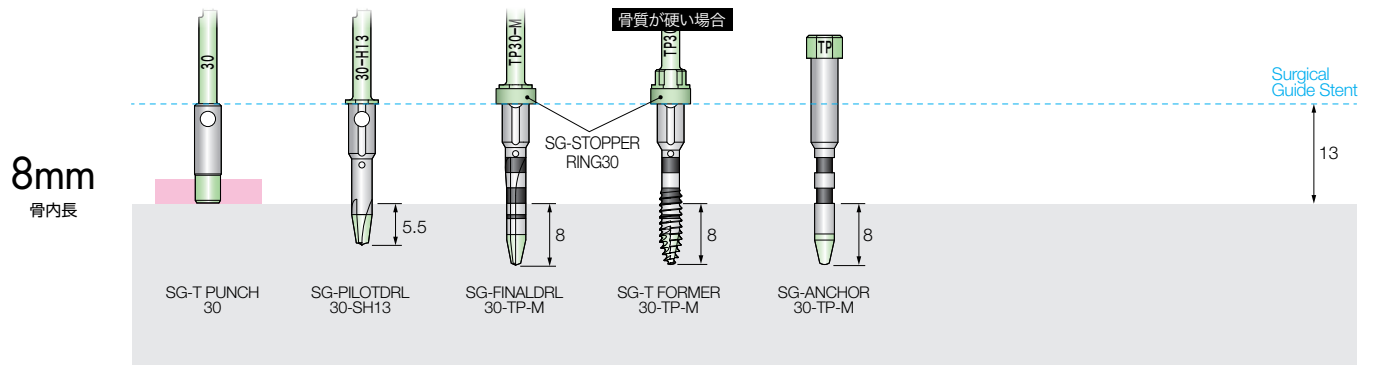
サージカルガイドステント高さ **13mm**

FINESIA®
Surgical Guide System
Operative Procedure Chart

Tapered type  術式チャート

インプラント径 $\phi 3.0\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。







1P: 1Piece

単位 :mm

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$

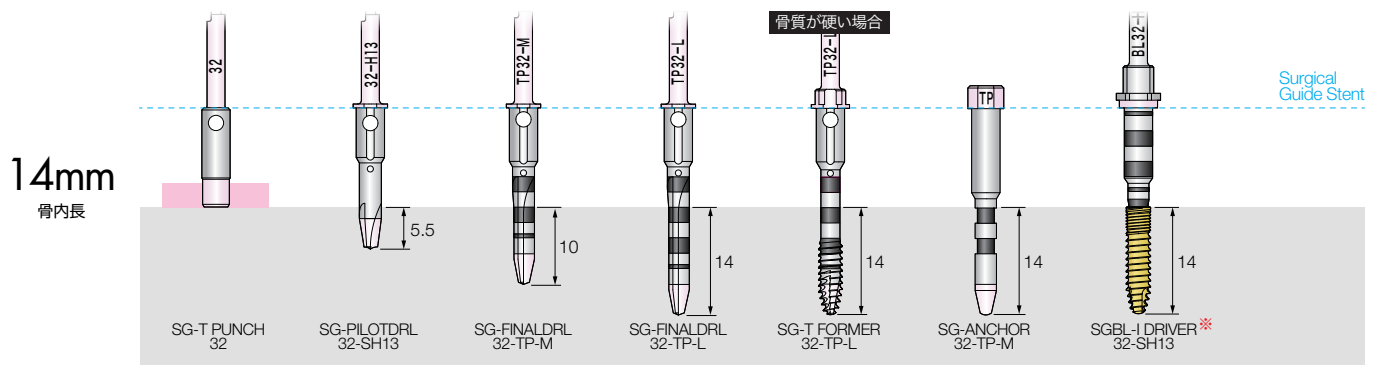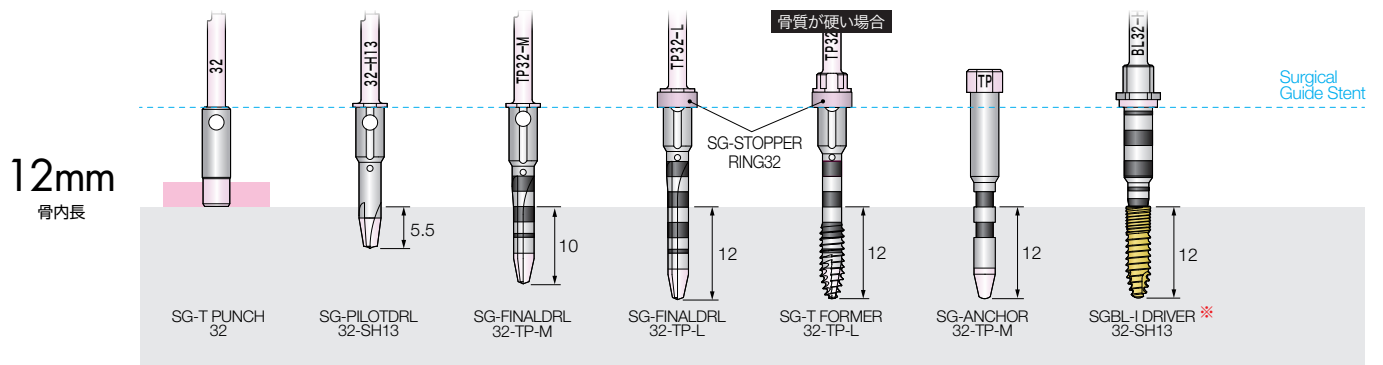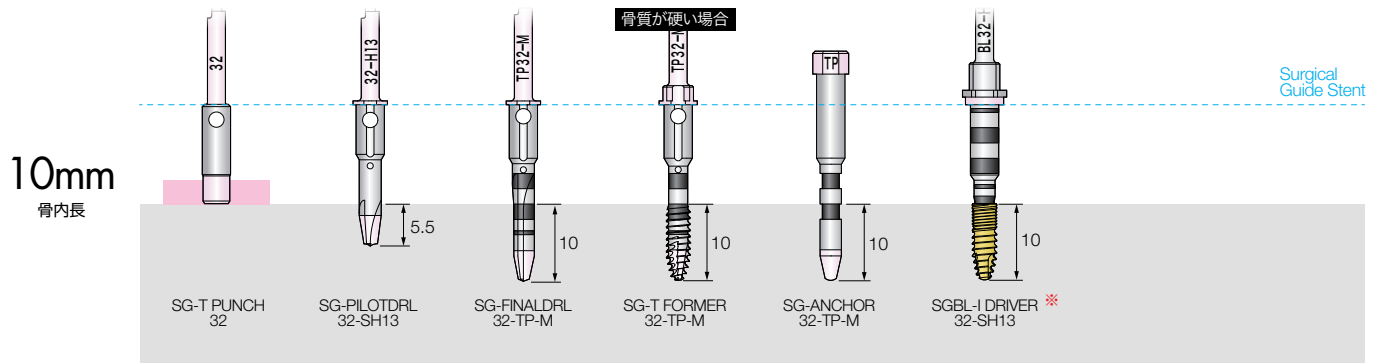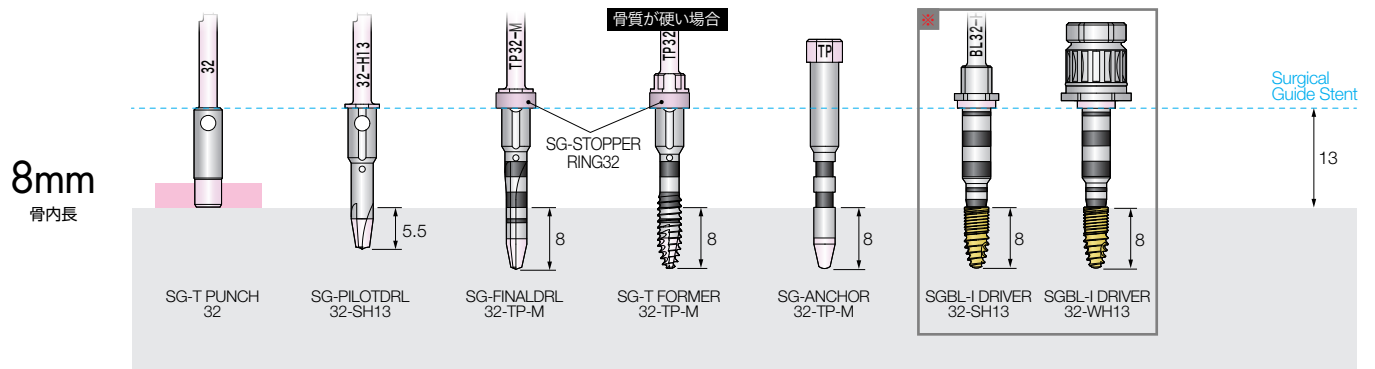1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム高さ

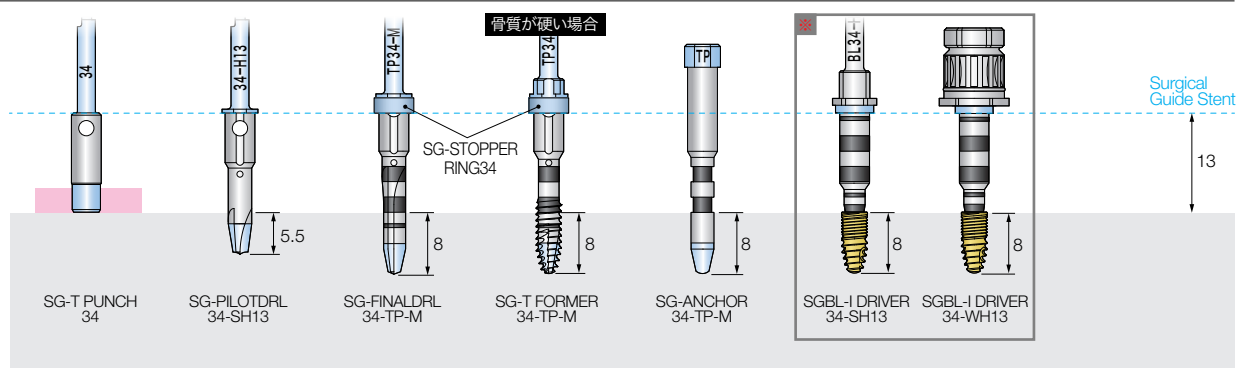
FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 


インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


8mm
骨内長




10mm
骨内長

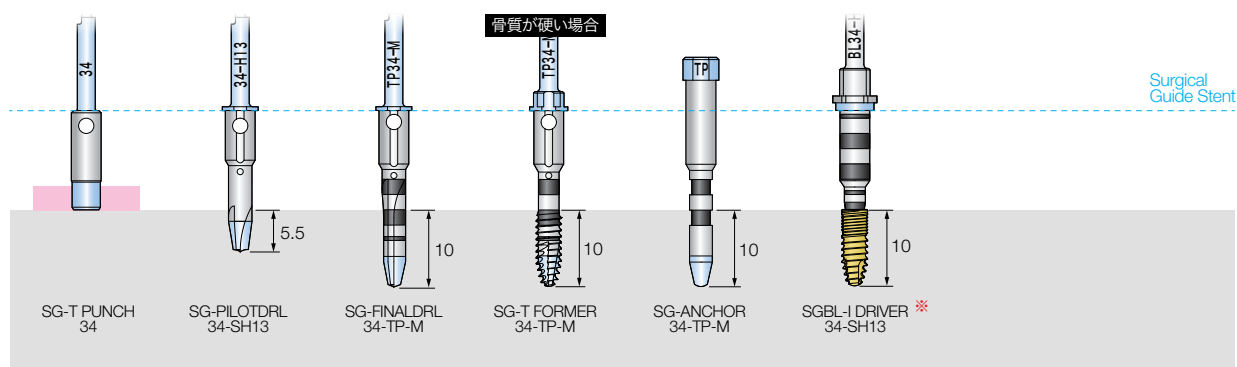

12mm
骨内長

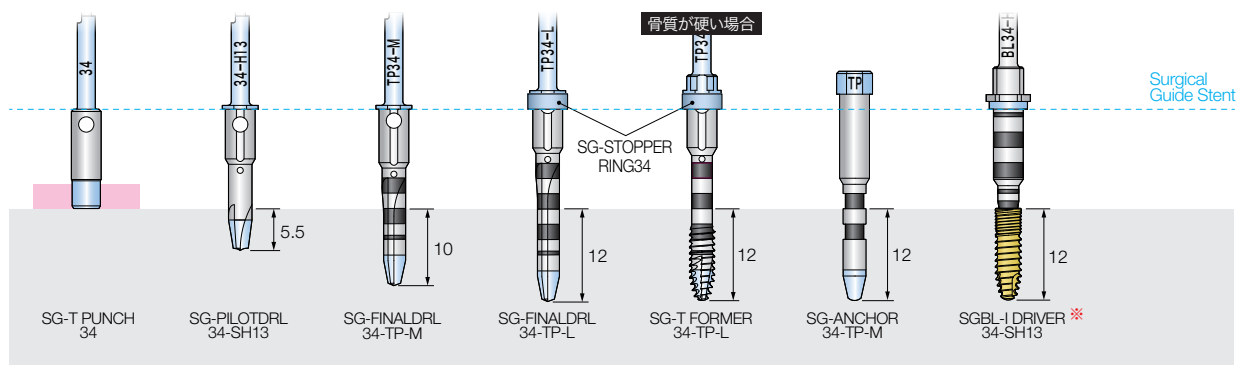

14mm
骨内長

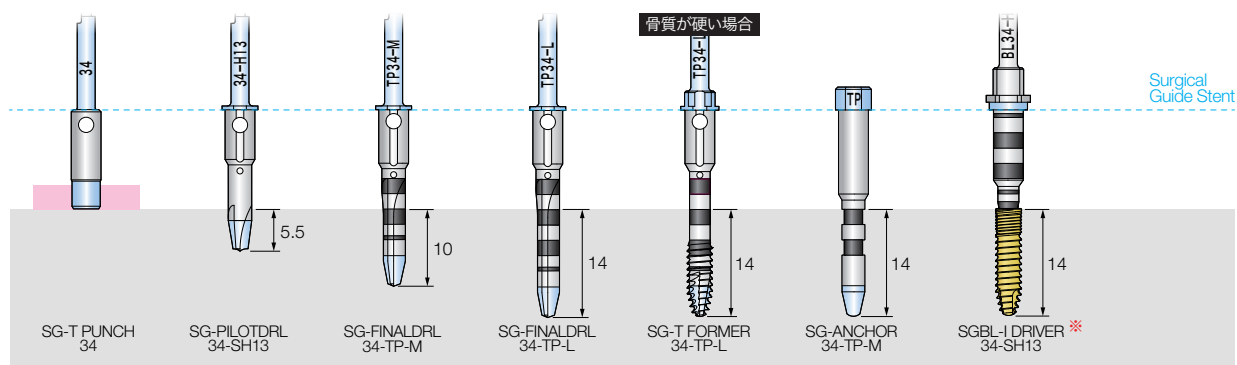





1P: 1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH13タイプを選択することができます。

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

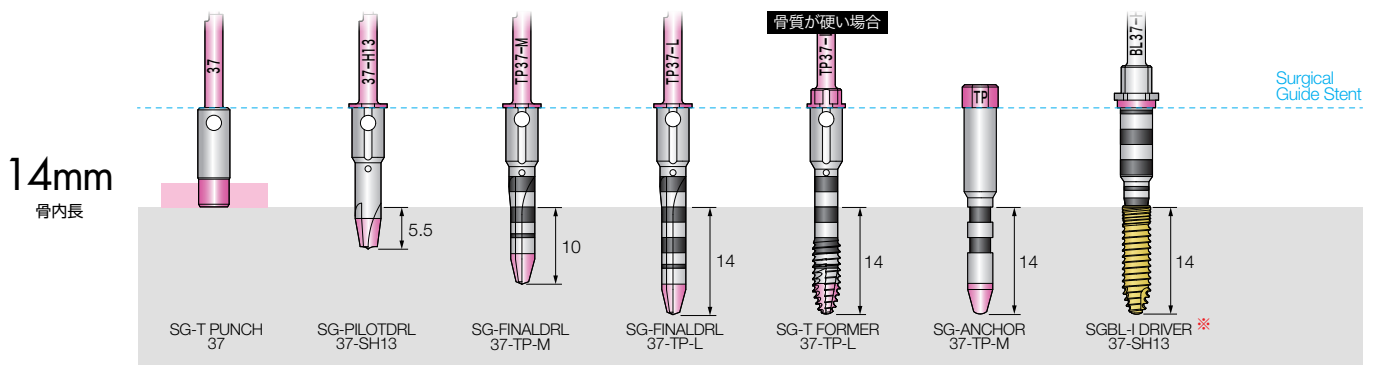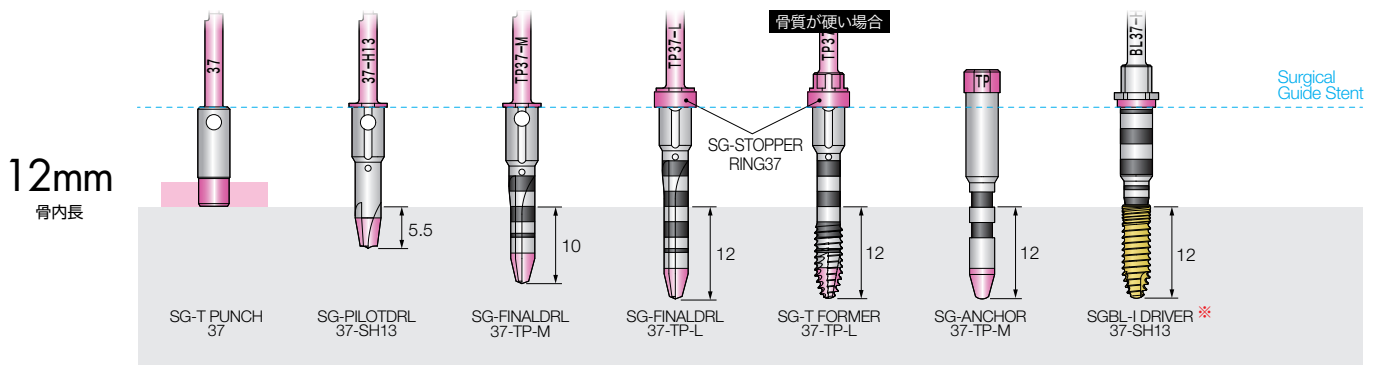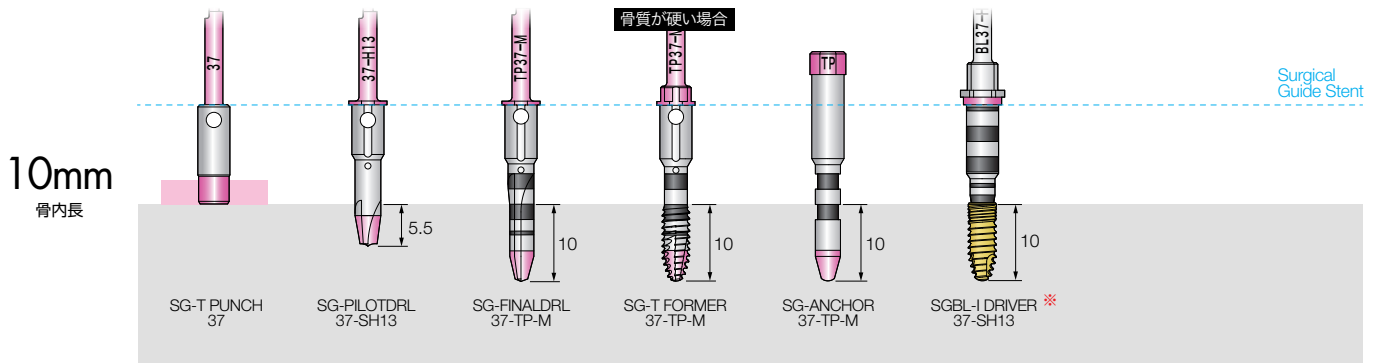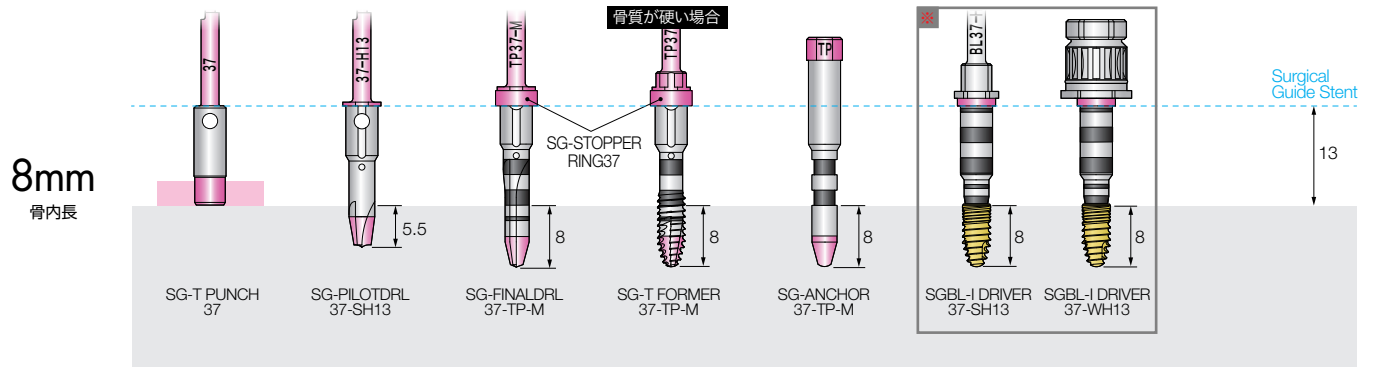1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム

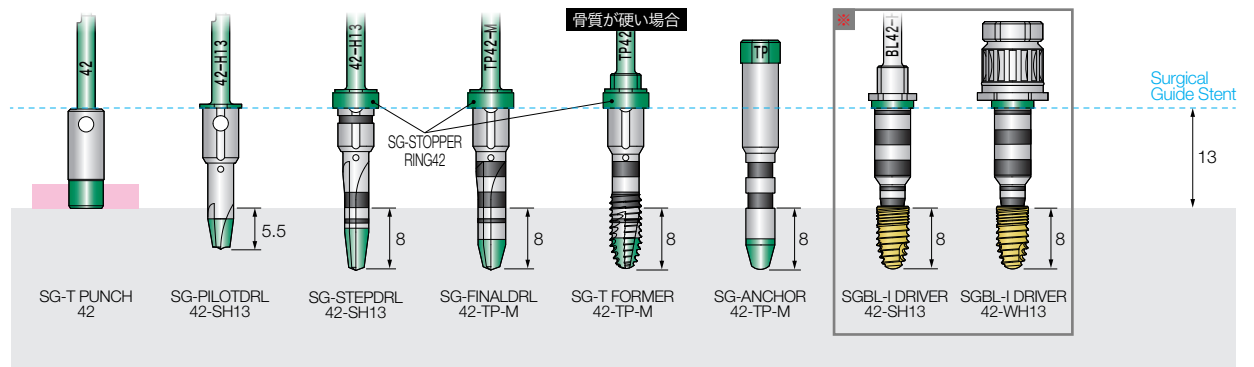
FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 


インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドセントを外してインプラントを埋入してください。


8mm
骨内長




10mm
骨内長

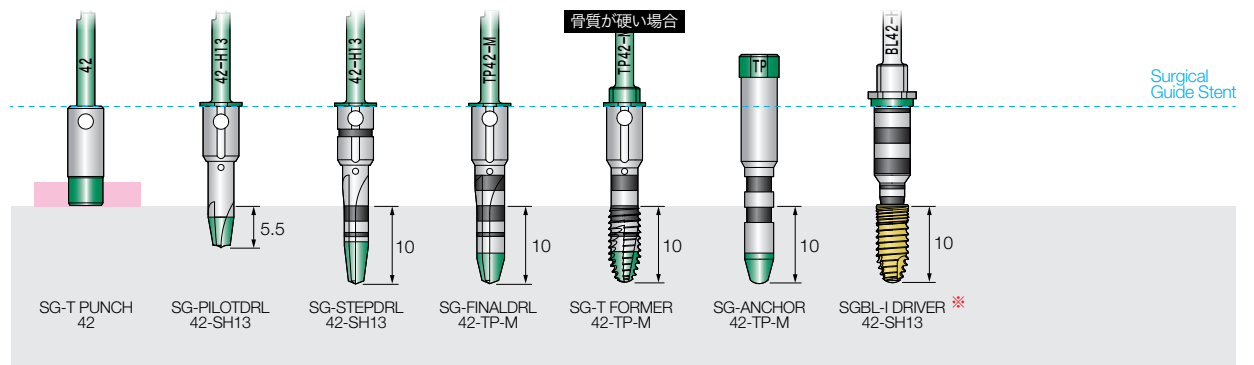

12mm
骨内長

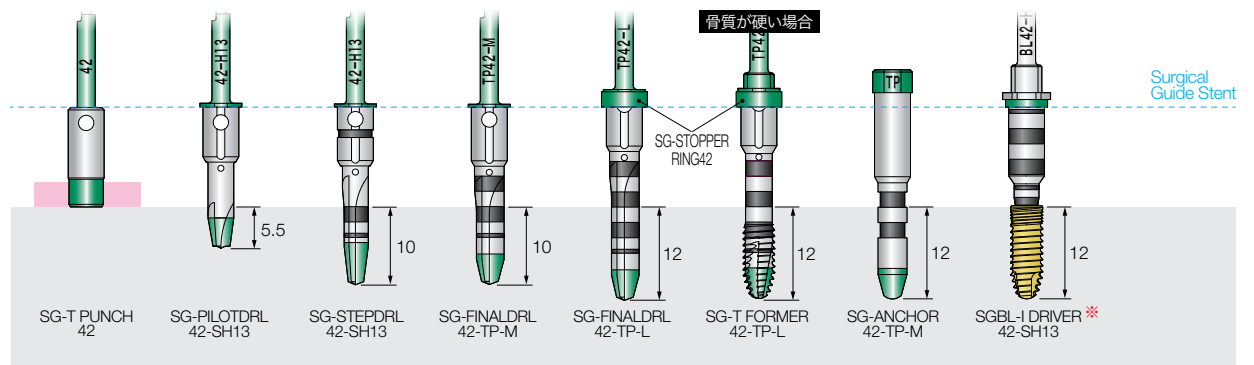

14mm
骨内長

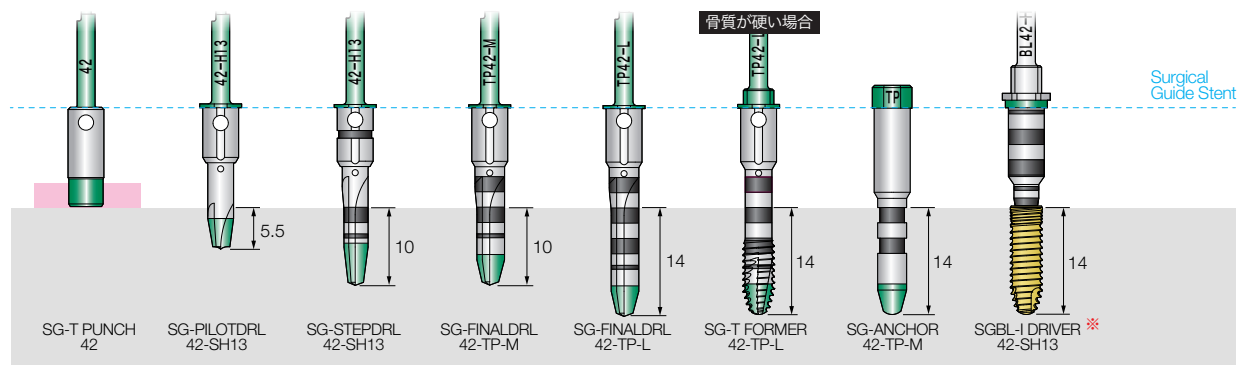

1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

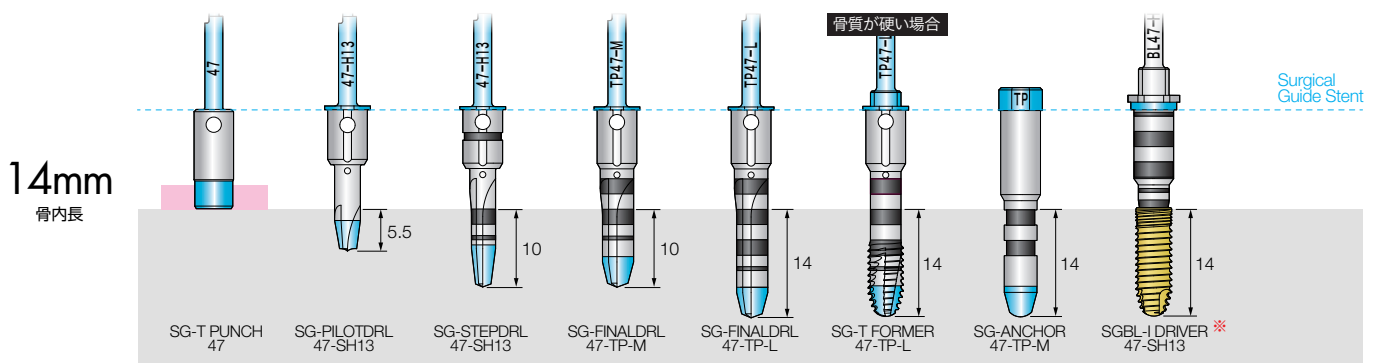
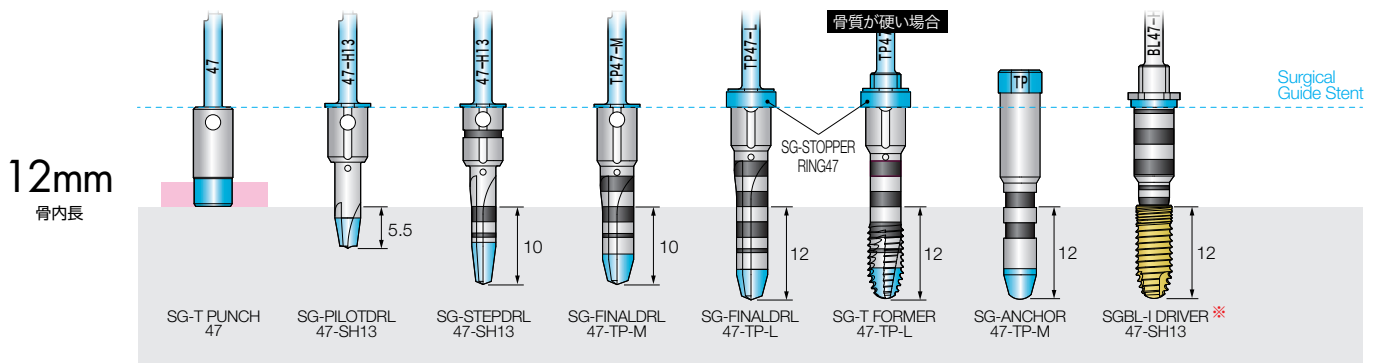
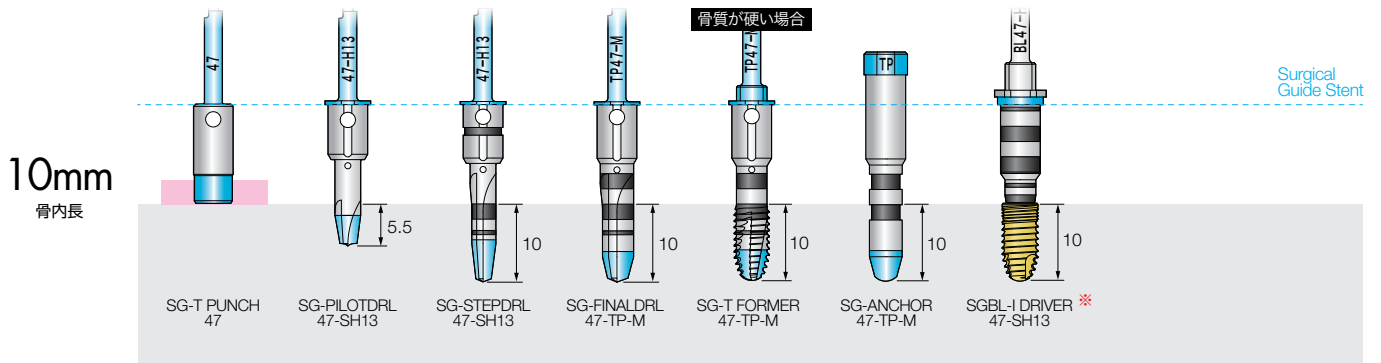
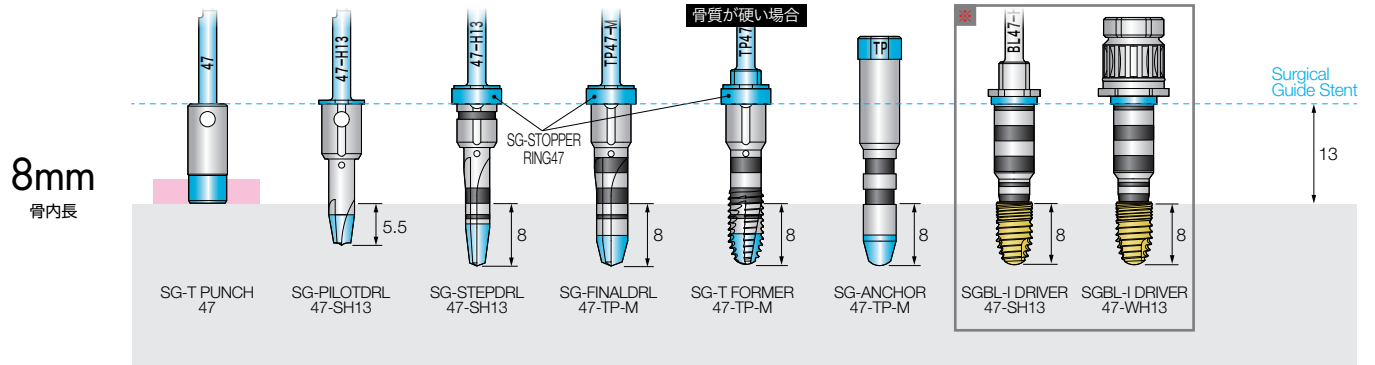
13mm
サージカルガイドシステム高さ

FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。



1P: 1Piece TL: Tissue Level

単位: mm

* 骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム

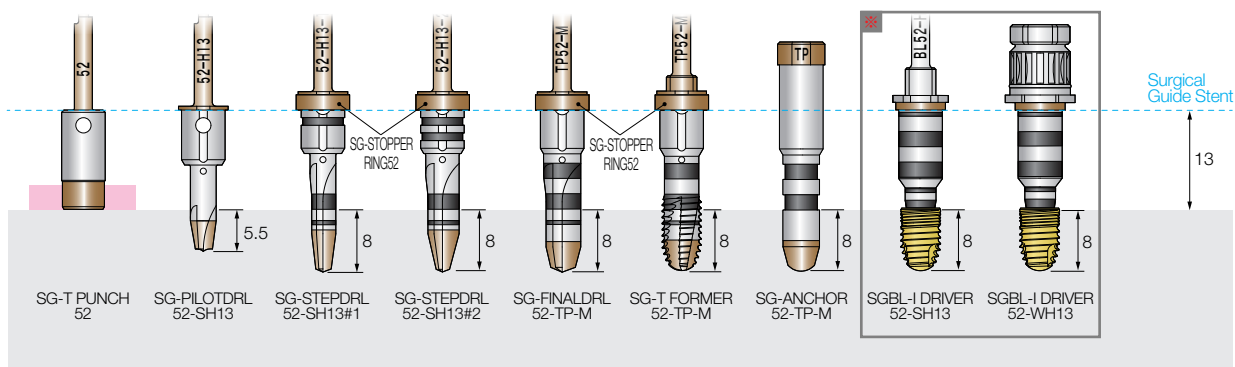
FINESIA® Surgical Guide System 術式チャート

Tapered type 


インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。


8mm
骨内長




10mm
骨内長

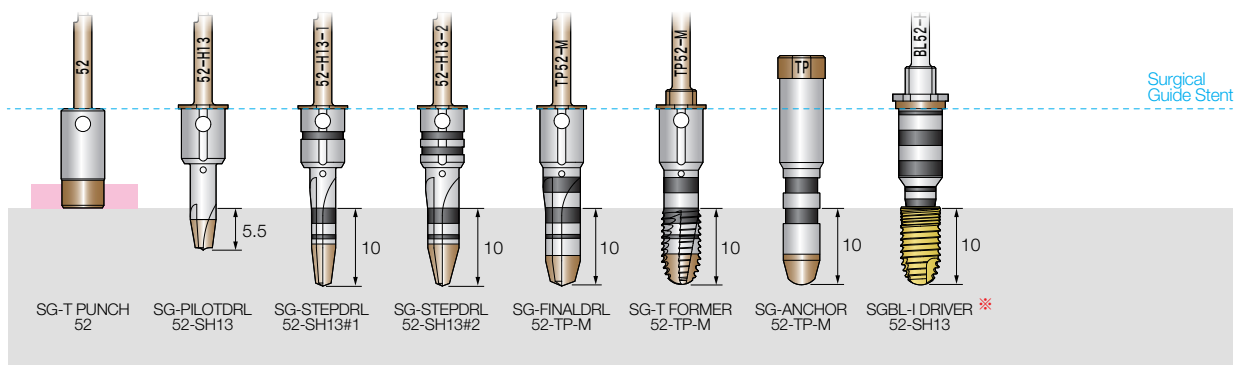

12mm
骨内長

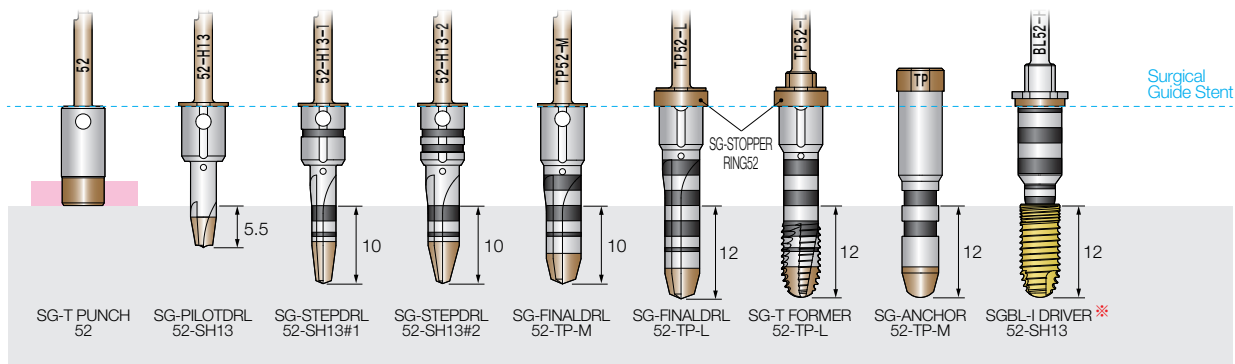

14mm
骨内長

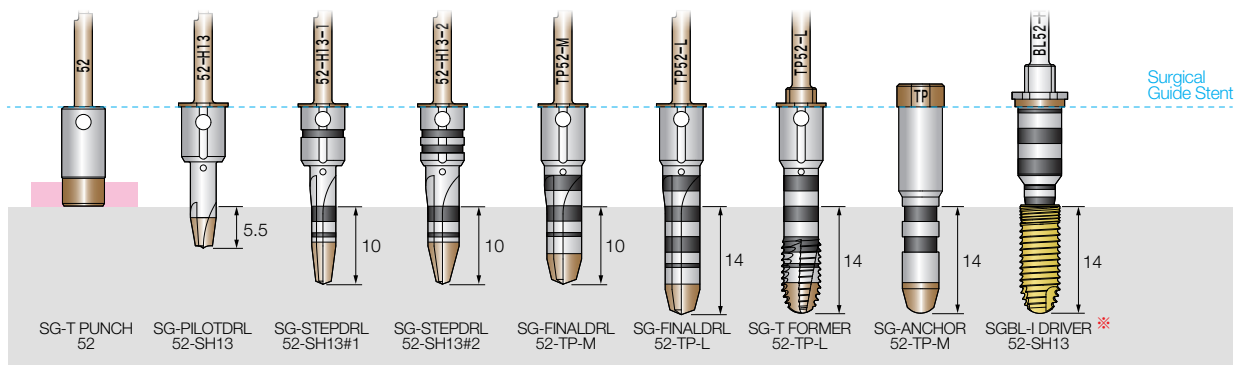

TL : Tissue Level

単位 : mm

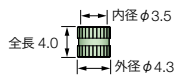
※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。

FINESIA®
Surgical Guide System

PRODUCT LIST


製品リスト

SGガイドチューブ

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-GUIDE TUBE30 ※	BCDI13100	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE30(50P)	BCDI13110	¥80,000
φ3.2		SG-GUIDE TUBE32 ※	BCDI13101	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE32(50P)	BCDI13111	¥80,000
φ3.4		SG-GUIDE TUBE34 ※	BCDI13102	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE34(50P)	BCDI13112	¥80,000
φ3.7		SG-GUIDE TUBE37 ※	BCDI13103	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE37(50P)	BCDI13113	¥80,000
φ4.2		SG-GUIDE TUBE42 ※	BCDI13104	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE42(50P)	BCDI13114	¥80,000
φ4.7		SG-GUIDE TUBE47 ※	BCDI13105	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE47(50P)	BCDI13115	¥80,000
φ5.2		SG-GUIDE TUBE52 ※	BCDI13106	¥4,000
		SG-GUIDE TUBE52(50P)	BCDI13116	¥80,000

※2個入り

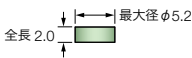SGストッパーリング

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-STOPPER RING30	BCDI13120	
φ3.2		SG-STOPPER RING32	BCDI13121	
φ3.4		SG-STOPPER RING34	BCDI13122	
φ3.7		SG-STOPPER RING37	BCDI13123	¥2,500
φ4.2		SG-STOPPER RING42	BCDI13124	
φ4.7		SG-STOPPER RING47	BCDI13125	
φ5.2		SG-STOPPER RING52	BCDI13126	

SGティッシュパンチ

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-T PUNCH30	BCDI13130	
φ3.2		SG-T PUNCH32	BCDI13131	
φ3.4		SG-T PUNCH34	BCDI13132	
φ3.7		SG-T PUNCH37	BCDI13133	¥7,200
φ4.2		SG-T PUNCH42	BCDI13134	
φ4.7		SG-T PUNCH47	BCDI13135	
φ5.2		SG-T PUNCH52	BCDI13136	

SGパイロットドリル

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-PILOTDRILL30-SH9	BCDI13150	¥9,000
		SG-PILOTDRILL30-SH11	BCDI13151 ※	
		SG-PILOTDRILL30-SH13	BCDI13152 ※	
φ3.2		SG-PILOTDRILL32-SH9	BCDI13153	
		SG-PILOTDRILL32-SH11	BCDI13154 ※	
		SG-PILOTDRILL32-SH13	BCDI13155 ※	
φ3.4		SG-PILOTDRILL34-SH9	BCDI13156	
		SG-PILOTDRILL34-SH11	BCDI13157 ※	
		SG-PILOTDRILL34-SH13	BCDI13158 ※	
φ3.7		SG-PILOTDRILL37-SH9	BCDI13159	
		SG-PILOTDRILL37-SH11	BCDI13160 ※	
		SG-PILOTDRILL37-SH13	BCDI13161 ※	
φ4.2		SG-PILOTDRILL42-SH9	BCDI13162	
		SG-PILOTDRILL42-SH11	BCDI13163 ※	
		SG-PILOTDRILL42-SH13	BCDI13164 ※	
φ4.7		SG-PILOTDRILL47-SH9	BCDI13165	
		SG-PILOTDRILL47-SH11	BCDI13166 ※	
		SG-PILOTDRILL47-SH13	BCDI13167 ※	
φ5.2		SG-PILOTDRILL52-SH9	BCDI13168	
		SG-PILOTDRILL52-SH11	BCDI13169 ※	
		SG-PILOTDRILL52-SH13	BCDI13170 ※	











SGステップドリル

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ4.2		SG-STEPPDRL42-SH9	BCDI13180	
		SG-STEPPDRL42-SH11	BCDI13181 ※	
		SG-STEPPDRL42-SH13	BCDI13182 ※	
φ4.7		SG-STEPPDRL47-SH9	BCDI13183	
		SG-STEPPDRL47-SH11	BCDI13184 ※	
		SG-STEPPDRL47-SH13	BCDI13185 ※	
φ5.2 (#1)		SG-STEPPDRL52-SH9#1	BCDI13186	¥10,000
		SG-STEPPDRL52-SH11#1	BCDI13187 ※	
		SG-STEPPDRL52-SH13#1	BCDI13188 ※	
φ5.2 (#2)		SG-STEPPDRL52-SH9#2	BCDI13189	
		SG-STEPPDRL52-SH11#2	BCDI13190 ※	
		SG-STEPPDRL52-SH13#2	BCDI13191 ※	

※受注生産品








SGファイナルドリルTP

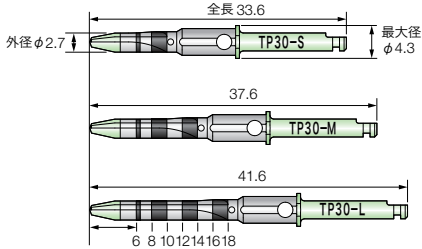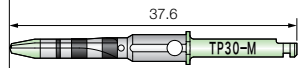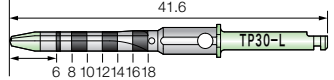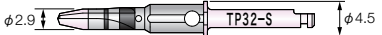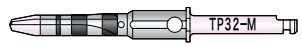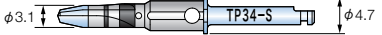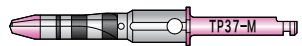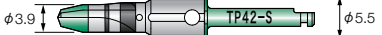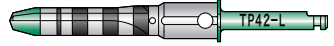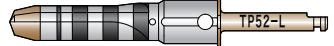Tapered type 

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-FINALDRL30-TP-S	BCDI13200	
		SG-FINALDRL30-TP-M	BCDI13201	
		SG-FINALDRL30-TP-L	BCDI13202	
φ3.2		SG-FINALDRL32-TP-S	BCDI13203	
		SG-FINALDRL32-TP-M	BCDI13204	
		SG-FINALDRL32-TP-L	BCDI13205	
φ3.4		SG-FINALDRL34-TP-S	BCDI13206	
		SG-FINALDRL34-TP-M	BCDI13207	
		SG-FINALDRL34-TP-L	BCDI13208	
φ3.7		SG-FINALDRL37-TP-S	BCDI13209	
		SG-FINALDRL37-TP-M	BCDI13210	¥10,000
		SG-FINALDRL37-TP-L	BCDI13211	
φ4.2		SG-FINALDRL42-TP-S	BCDI13212	
		SG-FINALDRL42-TP-M	BCDI13213	
		SG-FINALDRL42-TP-L	BCDI13214	
φ4.7		SG-FINALDRL47-TP-S	BCDI13215	
		SG-FINALDRL47-TP-M	BCDI13216	
		SG-FINALDRL47-TP-L	BCDI13217	
φ5.2		SG-FINALDRL52-TP-S	BCDI13218	
		SG-FINALDRL52-TP-M	BCDI13219	
		SG-FINALDRL52-TP-L	BCDI13220	



SGタップフォーマーTP

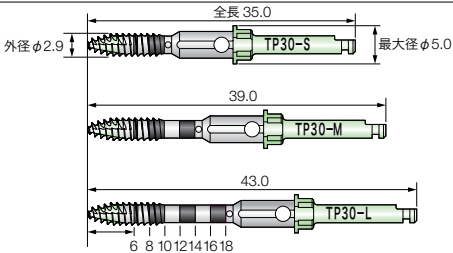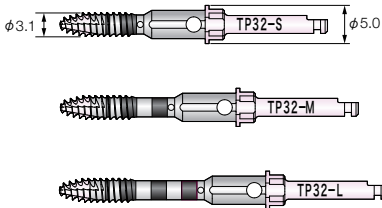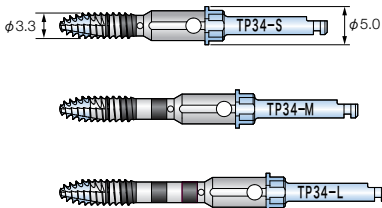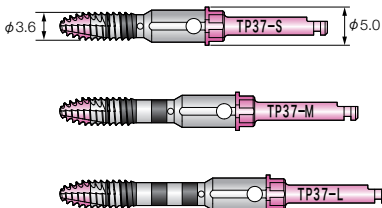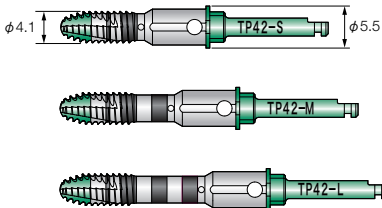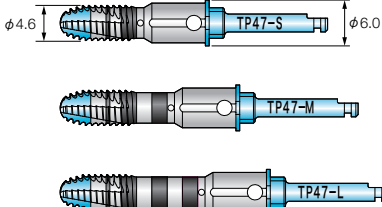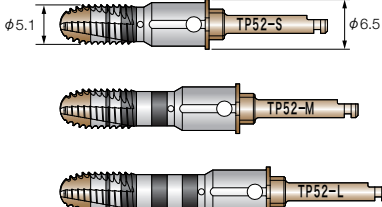Tapered type 











インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0	 全長 35.0 最大径 φ5.0 外径 φ2.9 TP30-S 39.0 43.0 6 8 10 12 14 16 18 TP30-M TP30-L	SG-T FORMER30-TP-S	BCDI13250	
		SG-T FORMER30-TP-M	BCDI13251	
		SG-T FORMER30-TP-L	BCDI13252	
φ3.2	 φ3.1 φ5.0 TP32-S TP32-M TP32-L	SG-T FORMER32-TP-S	BCDI13253	
		SG-T FORMER32-TP-M	BCDI13254	
		SG-T FORMER32-TP-L	BCDI13255	
φ3.4	 φ3.3 φ5.0 TP34-S TP34-M TP34-L	SG-T FORMER34-TP-S	BCDI13256	
		SG-T FORMER34-TP-M	BCDI13257	
		SG-T FORMER34-TP-L	BCDI13258	
φ3.7	 φ3.6 φ5.0 TP37-S TP37-M TP37-L	SG-T FORMER37-TP-S	BCDI13259	
		SG-T FORMER37-TP-M	BCDI13260	¥10,000
		SG-T FORMER37-TP-L	BCDI13261	
φ4.2	 φ4.1 φ5.5 TP42-S TP42-M TP42-L	SG-T FORMER42-TP-S	BCDI13262	
		SG-T FORMER42-TP-M	BCDI13263	
		SG-T FORMER42-TP-L	BCDI13264	
φ4.7	 φ4.6 φ6.0 TP47-S TP47-M TP47-L	SG-T FORMER47-TP-S	BCDI13265	
		SG-T FORMER47-TP-M	BCDI13266	
		SG-T FORMER47-TP-L	BCDI13267	
φ5.2	 φ5.1 φ6.5 TP52-S TP52-M TP52-L	SG-T FORMER52-TP-S	BCDI13268	
		SG-T FORMER52-TP-M	BCDI13269	
		SG-T FORMER52-TP-L	BCDI13270	

SGガイドアンカーTP

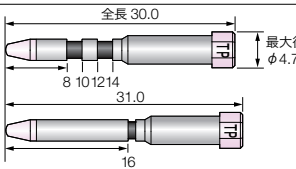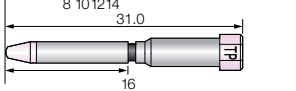Tapered type 


















インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.0		SG-ANCHOR30-TP-M	BCDI13300	
φ3.2		SG-ANCHOR32-TP-M	BCDI13302	
		SG-ANCHOR32-TP-L	BCDI13303	
φ3.4		SG-ANCHOR34-TP-M	BCDI13304	
		SG-ANCHOR34-TP-L	BCDI13305	
φ3.7		SG-ANCHOR37-TP-M	BCDI13306	
		SG-ANCHOR37-TP-L	BCDI13307	¥9,000
φ4.2		SG-ANCHOR42-TP-M	BCDI13308	
		SG-ANCHOR42-TP-L	BCDI13309	
φ4.7		SG-ANCHOR47-TP-M	BCDI13310	
		SG-ANCHOR47-TP-L	BCDI13311	
φ5.2		SG-ANCHOR52-TP-M	BCDI13312	
		SG-ANCHOR52-TP-L	BCDI13313	

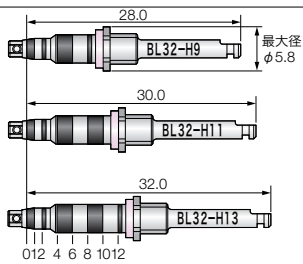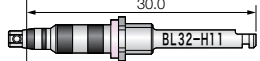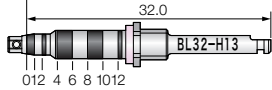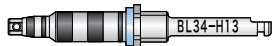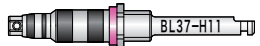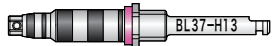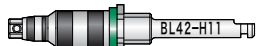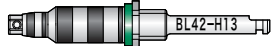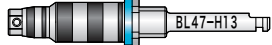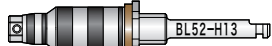SG BLインプラントドライバー

インプラント径 (単位: mm)	寸法・形状 (単位: mm)	商品名	商品コード	希望小売価格 (税別)
φ3.2		SGBL-I DRIVER32-SH9	BCDI13340	
		SGBL-I DRIVER32-SH11	BCDI13341 ※	
		SGBL-I DRIVER32-SH13	BCDI13342 ※	
φ3.4		SGBL-I DRIVER34-SH9	BCDI13343	
		SGBL-I DRIVER34-SH11	BCDI13344 ※	
		SGBL-I DRIVER34-SH13	BCDI13345 ※	
φ3.7		SGBL-I DRIVER37-SH9	BCDI13346	
		SGBL-I DRIVER37-SH11	BCDI13347 ※	
		SGBL-I DRIVER37-SH13	BCDI13348 ※	
φ4.2		SGBL-I DRIVER42-SH9	BCDI13349	¥17,000
		SGBL-I DRIVER42-SH11	BCDI13350 ※	
		SGBL-I DRIVER42-SH13	BCDI13351 ※	
φ4.7		SGBL-I DRIVER47-SH9	BCDI13352	
		SGBL-I DRIVER47-SH11	BCDI13353 ※	
		SGBL-I DRIVER47-SH13	BCDI13354 ※	
φ5.2		SGBL-I DRIVER52-SH9	BCDI13355	
		SGBL-I DRIVER52-SH11	BCDI13356 ※	
		SGBL-I DRIVER52-SH13	BCDI13357 ※	

※受注生産品

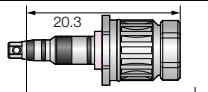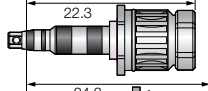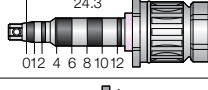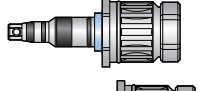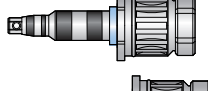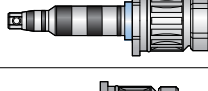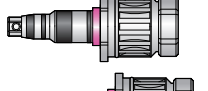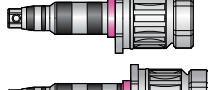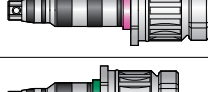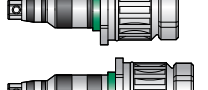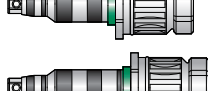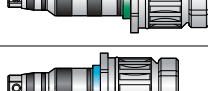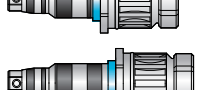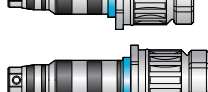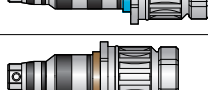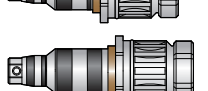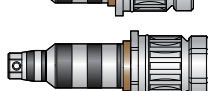SG BLインプラントドライバー-WH

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
φ3.2		SGBL-I DRIVER32-WH9	BCDI13411	¥24,000
		SGBL-I DRIVER32-WH11	BCDI13412	
		SGBL-I DRIVER32-WH13	BCDI13413	
φ3.4		SGBL-I DRIVER34-WH9	BCDI13414	
		SGBL-I DRIVER34-WH11	BCDI13415	
		SGBL-I DRIVER34-WH13	BCDI13416	
φ3.7		SGBL-I DRIVER37-WH9	BCDI13417	
		SGBL-I DRIVER37-WH11	BCDI13418	
		SGBL-I DRIVER37-WH13	BCDI13419	
φ4.2		SGBL-I DRIVER42-WH9	BCDI13420	
		SGBL-I DRIVER42-WH11	BCDI13421	
		SGBL-I DRIVER42-WH13	BCDI13422	
φ4.7		SGBL-I DRIVER47-WH9	BCDI13423	
		SGBL-I DRIVER47-WH11	BCDI13424	
		SGBL-I DRIVER47-WH13	BCDI13425	
φ5.2		SGBL-I DRIVER52-WH9	BCDI13426	
		SGBL-I DRIVER52-WH11	BCDI13427	
		SGBL-I DRIVER52-WH13	BCDI13428	

ケース関連


	商品名	商品コード	希望小売価格(税別)
	TITANIUM TRAY	BCDI13400	¥5,000
	F-SG-SURGICAL CASE	BCDI13390	¥49,000



TITANIUM TRAY



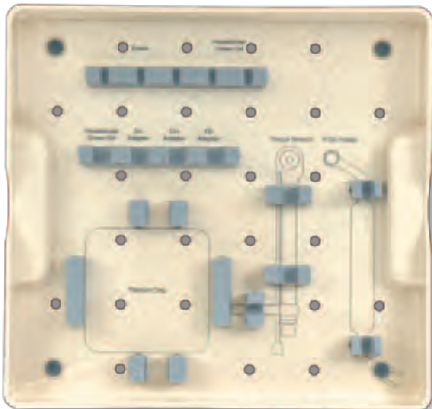F-SG-SURGICAL CASE



NOTES

NOTES



京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本 社 京都市伏見区竹田烏羽殿町6番地 〒612-8501
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 1・Sビル 〒140-8810
Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータービル6F) 〒461-0004
Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

FINESIA サージカルガイドシステム器具【医療機器届出番号：27B1X00139101123】

「FINESIA」は、京セラ株式会社の登録商標です。

当術式マニュアルに記載の情報は2019年9月時点のものです。